

medical line



ORLETT

Зарегистрировано в Росздравнадзоре



Инструкция по применению
ортопедических изделий

КОРСЕТ ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ

BS-222

WWW.ORLETT.RU

СВОЙСТВА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Корсет ортопедический Orlett пояснично-крестцовый полужесткий с металлическими ребрами и дополнительными фиксирующими ремнями, арт. BS-222, разгружает и стабилизирует поясничный отдел позвоночника. Дополнительные фиксирующие ремни позволяют индивидуально регулировать степень прилегания корсета и менять степень компрессионного воздействия. Корсет выполнен из современного эластичного материала, который обладает повышенными показателями влаго- и воздухопроницаемости. Соединение частей изделия выполнено с помощью современной технологии высокочастотной микросварки. Корсет является основой модульной системы, которая позволяет осуществлять этапное лечение заболеваний позвоночника. Отпускается без рецепта.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- люмбаго;
- ишиас;
- дегенеративные заболевания позвоночника;
- мышечные атонии;
- до- и послеоперационное лечение;
- грыжи дисков;
- спондилоартроз;
- спондилолизис.

РЕЖИМ И СРОКИ НОШЕНИЯ

Режим и сроки ношения корсета назначает лечащий врач. Изделие предназначено для многократного личного использования. Возможные последствия при использовании товара не по назначению не выявлены.

ПРОТИВПОКАЗАНИЯ

- индивидуальная непереносимость материалов;
- гнойно-септические заболевания кожи в области применения корсета.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Перед применением рекомендуется проконсультироваться со специалистом.

В случаях гнойных заболеваний и/или заболеваний кожи в области применения корсета необходима консультация лечащего врача.

При возникновении какого-либо физического дискомфорта или раздражения следует немедленно проконсультироваться у врача о возможности дальнейшего применения корсета.

КОНСТРУКЦИЯ

Цифры на рис. 1, 2, 3 соответствуют следующим элементам конструкции:

1. Фиксирующий пояс корсета с застежкой-липучкой micro velcro.
2. Спинка корсета с 4 металлическими ребрами жесткости.
3. Дополнительные фиксирующие ремни.

ПОРЯДОК НАДЕВАНИЯ

Корсет надевается лежа на спине.

1. Фиксирующий пояс надеть так, чтобы нижний край эластичного пояса в застегнутом состоянии проходил по линии таза (рис. 2).
2. Зафиксировать корсет дополнительными фиксирующими ремнями (рис. 3).

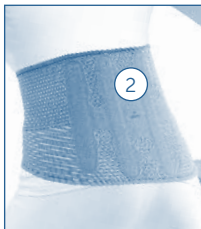


рис. 1

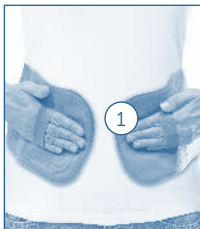


рис. 2


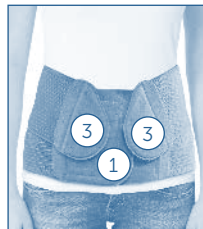


рис. 3

ПРАВИЛА ПОДБОРА

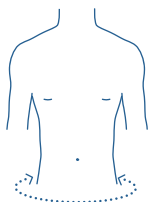

Для корректного подбора корсета ортопедического Orlett необходимо измерить сантиметровой лентой плотно, но не утягивая, окружность бедер.

Согласно полученным результатам подобрать корсет по таблице подбора размеров.

ТАБЛИЦА ПОДБОРА РАЗМЕРОВ

Размер (по объему)	Окруж- ность бедер, см	Высота абдоми- нальной панели, см		Высота спинки, см	
		стан- дартный	высокий	стан- дартный	высокий
XS	75-82	16	20	26	30
S	82-90				
M	90-100				
L	100-110				
XL	110-120				
XXL	120-130				

Чтобы проверить правильность выбора размера, рекомендуется примерить корсет. Важно, чтобы корсет был удобен.

ПРАВИЛА УХОДА

Для поддержания функциональных свойств полотна необходим регулярный уход за изделием. Рекомендуется стирать Ваше изделие после 3-5 применений. Машинная стирка в деликатном режиме при температуре не выше 30°C. Обращаться с осторожностью. Не применять хлорсодержащие средства. Глажение запрещено. Пропаривание и обработку паром не применять. Сухая чистка/химчистка запрещена. Удаление пятен растворителями запрещено. Не применять сушку в барабане.

Сушить не отжимая, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей.

Для изделий со съёмными или отстёгивающимися каркасами, шинами, рёбрами жёсткости или шарнирами: отсоединять данные съёмные элементы перед стиркой! После полного высыхания изделия следует вернуть их обратно.



СОСТАВ

31% полиамид, 26% INOX, 16% полиуретан, 12% полиэстер, 10% эластан, 4% полиэтилен, 1% полиоксиметилен.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Корсет должен храниться при комнатной температуре, в сухом помещении, вдали от источников тепла, прямого солнечного света и пыли.

УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

Корсет утилизировать с бытовым мусором.

СРОК ГОДНОСТИ

Срок годности не установлен. Возможность использования корсета дольше, чем предписано курсом лечения, должна быть согласована с врачом. Не допускается прекращение использования корсета без согласования с лечащим врачом. Не допускается самостоятельное изменение конструкции корсета. Не допускается эксплуатация поврежденного корсета.

По окончании периода использования товар не представляет опасности для потребителя и подлежит утилизации.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Ортопедическое изделие арт. BS-222, инструкция по применению.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

6 месяцев с момента продажи при соблюдении инструкции.

ГАРАНТИЙНЫМИ СЛУЧАЯМИ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ

- механические повреждения (включая случайные);
- повреждения, вызванные использованием товара не по назначению;
- дефекты, возникшие как следствие нарушения инструкции и правил ухода за изделием;
- несанкционированный ремонт или внесение изменений в конструкцию.

**К ВНЕШНЕМУ ВИДУ И ПОДБОРУ РАЗМЕРА
ПРЕТЕНЗИЙ НЕ ИМЕЮ**

Дата покупки: _____

Подпись покупателя: _____

Изделия протезно-ортопедические: ортезы на верхние конечности, корсеты ортопедические, корректоры осанки, реклинаторы: корсет ортопедический, арт. BS-222. Товар является медицинским изделием.
Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/09549 от 17.12.2021 г. выдано Росздравнадзором, срок действия не ограничен.

Производитель: Рехард Технолджис ГмбХ, Германия, Rehard Technologies GmbH, 10785 Berlin, Potsdamer Str. 92, Germany.

Место производства: PRIM, S.A., C/Yolanda González 15, P.I. 1 28938 Móstoles. Madrid, Spain.

Импортер/уполномоченный представитель в РФ: ООО «НИКАМЕД», Россия, 127015, Москва, Бумажный проезд, д. 14, стр. 2.

Претензии направлять: Россия, 127220, Москва, а/я № 58, ООО «НИКАМЕД», тел.: 8-800-33-33-112, e-mail: skk@nikamed.ru.

