

medical line



ORLETT

Зарегистрировано в Росздравнадзоре



Инструкция по применению
ортопедических изделий

БАНДАЖИ НА ГРУДНУЮ КЛЕТКУ

AB-206(M)

AB-206(W)

WWW.ORLETT.RU

СВОЙСТВА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Бандаж Orlett на грудную клетку, женский, арт. АВ-206(W), и бандаж Orlett на грудную клетку, мужской, арт. АВ-206(M) обеспечивают легкую степень фиксации, мягкую поддержку и равномерное сдавливание грудной клетки после травм и операций. Способствуют уменьшению риска развития осложнений, облегчают состояние пациентов при миалгиях, миозитах и межреберных невралгиях. В женской модели бандажа, арт. АВ-206(W), предусмотрен вырез в области груди.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- миалгии, миозиты;
- межреберные невралгии;
- реабилитационный период после травм и операций на грудной клетке.

РЕЖИМ И СРОКИ НОШЕНИЯ

Режим и сроки ношения назначает лечащий врач. Изделие предназначено для многократного личного использования. Возможные последствия при использовании товара не по назначению не выявлены.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

- «окончатые» переломы ребер;
- напряженный гемо- или пневмоторакс;
- индивидуальная непереносимость материалов;
- гнойные заболевания и заболевания кожи в области применения бандажа.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

В случаях гнойных заболеваний и/или заболеваний кожи в области применения бандажа необходима консультация лечащего врача. Людям с чувствительной кожей следует надевать бандаж на нижнее бельё, плотно прилегающее к телу.

При возникновении какого-либо физического дискомфорта или раздражения следует немедленно прекратить использование бандажа и проконсультироваться с врачом о возможности его дальнейшего применения.

Перед применением рекомендуется проконсультироваться со специалистом.

КОНСТРУКЦИЯ

Бандаж Orlett на грудную клетку, мужской, арт. АВ-206(М) (рис. 1), и бандаж Orlett на грудную клетку, женский, арт. АВ-206(W) (рис. 2), состоят из:

1. эластичного пояса;
2. застёжки-липучки «Велкро».

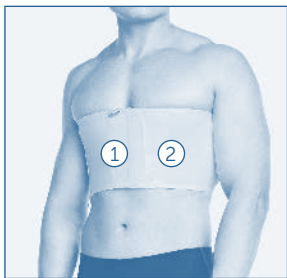


рис. 1

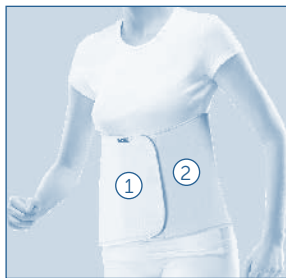


рис. 2


ПОРЯДОК НАДЕВАНИЯ

Бандаж надевают на область грудной клетки в состоянии нефорсированного (неполного) выдоха.

ВНИМАНИЕ!

Не следует затягивать бандаж слишком сильно, во избежание нарушения дыхания.

ПРАВИЛА ПОДБОРА

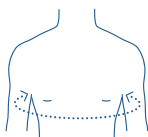

Сантиметровой лентой плотно, но не утягивая, измеряется окружность грудной клетки на уровне сосков.

Согласно полученным результатам подбирается необходимая модель банджа Orlett по таблице подбора размеров.

ТАБЛИЦА ПОДБОРА РАЗМЕРОВ

Размер	Окружность грудной клетки, см
S	до 82
M	82-96
L	96-110
XL	110-124
XXL	более 124

Чтобы проверить правильность выбора размера, рекомендуется примерить бандаж. Важно, чтобы бандаж был удобен.

ПРАВИЛА УХОДА

Для поддержания функциональных свойств полотна необходим регулярный уход за изделием. Рекомендуется стирать Ваше изделие после 1-2 применений. Только ручная стирка. Машинную стирку не применять. Максимальная температура 40°C. Обращаться с осторожностью. Не применять хлорсодержащие средства. Глажение запрещено. Пропаривание и обработку паром не применять. Сухая чистка/химчистка запрещена. Удаление пятен растворителями запрещено. Не применять сушку в барабане. Сушить не отжимая, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей.



СОСТАВ

60% полиэстер, 22% полиамид, 18% эластан.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Бандаж должен храниться при комнатной температуре, в сухом помещении, вдали от источников тепла, прямого солнечного света и пыли.

УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

Бандаж утилизировать с бытовым мусором.

СРОК ГОДНОСТИ

Срок годности не установлен.

Возможность использования бандажа дольше, чем предписано курсом лечения, должна быть согласована с врачом. Не допускается прекращение использования бандажа без согласования с лечащим врачом. Не допускается самостоятельное изменение конструкции бандажа. Не допускается эксплуатация поврежденного бандажа.

По окончании периода использования товар не представляет опасности для потребителя и подлежит утилизации.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Бандаж Orlett АВ-206(W): ортопедическое изделие арт. АВ-206(W), инструкция по применению.

Бандаж Orlett АВ-206(M): ортопедическое изделие арт. АВ-206(M), инструкция по применению.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

6 месяцев с момента продажи при соблюдении инструкции.

ГАРАНТИЙНЫМИ СЛУЧАЯМИ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ

- механические повреждения (включая случайные);
- повреждения, вызванные использованием товара не по назначению;
- дефекты, возникшие как следствие нарушения инструкции по применению и правил ухода за изделием;
- несанкционированный ремонт или внесение изменений в конструкцию.

К ВНЕШНЕМУ ВИДУ И ПОДБОРУ РАЗМЕРА ПРЕТЕНЗИЙ НЕ ИМЕЮ

Дата покупки: _____

Подпись покупателя: _____



Изделия протезно-ортопедические: бандажи ортопедические на верхние конечности: бандажи на брюшную стенку: арт. АВ-206(М), АВ-206(W).

Товар является медицинским изделием.

Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/09551 от 26.06.2014 г. выдано Росздравнадзором, срок действия не ограничен.

Декларация о соответствии № РОСС RU Д-ДЕ.НА38.В.00220/20 (с 17.03.2020 г. по 16.03.2023 г.) выдана ООО «Сервис Плюс».

Производитель: Рехард Технолоджис ГмбХ, Германия, 10785, Берлин, Потсдамер штрассе, 92.

Импортер: ООО «Орто Медикл Групп», Россия, 143405, Московская обл., г. Красногорск, Ильинское шоссе, д. 16, корп. 1.

Претензии направлять: Россия, 127220, Москва, а/я № 58, ООО «НИКАМЕД» представитель в России и СНГ, тел.: 8-800-33-33-112, e-mail: skk@nikamed.ru.

