


medical line



ORLETT

Зарегистрировано в Росздравнадзоре

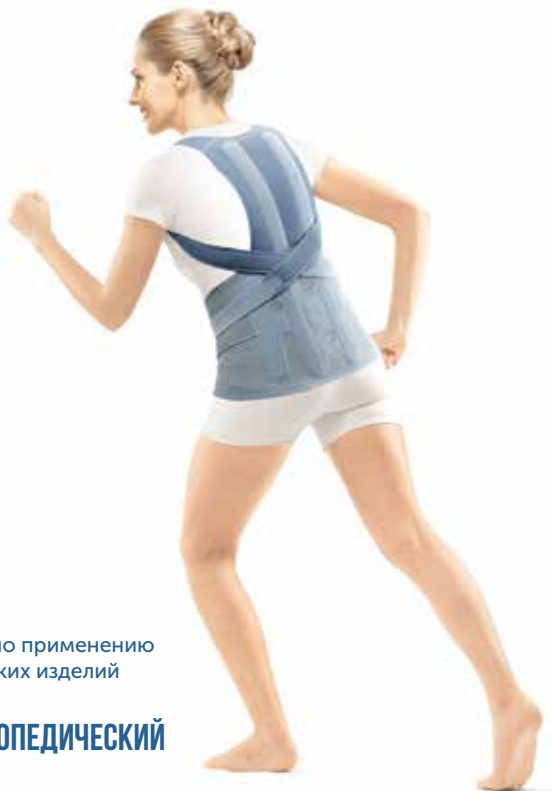

Инструкция по применению
ортопедических изделий

КОРСЕТ ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ

BS-222(2)

WWW.ORLETT.RU

СВОЙСТВА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Поясничный модуль ORLETT, арт. BS-222(2), является составной частью модульной системы. Модуль может использоваться вместе с корсетом BS-222 стандартной или высокой версий для полной фиксации поясничного отдела позвоночника. Также модуль может использоваться в составе полного комплекта модульной системы для полной фиксации грудопоясничного отдела позвоночника.

Отпускается без рецепта.

ВНИМАНИЕ!

Поясничный модуль не может использоваться отдельно от корсета.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- люмбаго;
- ишиас;
- дегенеративные заболевания позвоночника;
- мышечные атонии;
- до- и послеоперационное лечение;
- грыжи дисков;
- спондилоартроз;
- спондилолизис.

РЕЖИМ И СРОКИ НОШЕНИЯ

Режим и сроки ношения корсета назначает лечащий врач. Изделие предназначено для многократного личного использования. Возможные последствия при использовании товара не по назначению не выявлены.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

- индивидуальная непереносимость материалов;
- гнойно-септические заболевания кожи в области применения корсета.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Перед применением рекомендуется проконсультироваться со специалистом.

ПОРЯДОК НАДЕВАНИЯ

Цифры на рис. 1, 2 соответствуют следующим элементам конструкции:

- Фиксирующая зона корсета (1).
- Поясничный модуль корсета с застежками микро Велкро с изнаночной стороны. (2).

Модульная система собирается на ровной гладкой поверхности.

1. Расправить корсет изнаночной стороной вверх (рис. 2).
2. С помощью застежек микро Велкро присоедините груднопоясничный модуль к корсету.
3. С помощью застежек микро Велкро с изнаночной стороны присоедините поясничный модуль.

Если Вам требуется только поясничная система фиксации, пропустите шаг 2.

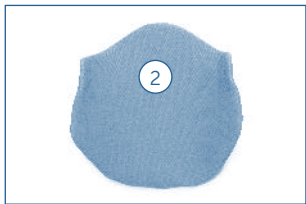


рис. 1


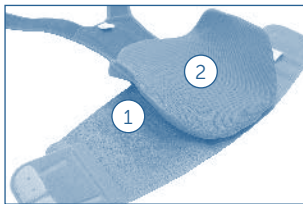


рис. 2

ВАЖНО! Металлические ребра жесткости корсета и груднопоясничного модуля должны совпадать друг с другом.

ПРАВИЛА ПОДБОРА

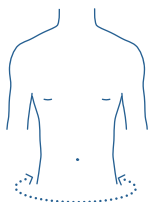

Для корректного подбора корсета ортопедического Orlett необходимо измерить сантиметровой лентой плотно, но не утягивая, окружность бедер.

Согласно полученным результатам подобрать корсет по таблице подбора размеров.

ТАБЛИЦА ПОДБОРА РАЗМЕРОВ

Размер	Окружность бедер, см	Высота спинки, см
1 30	75-82	30
2 30	82-100	
3 30	100-110	
4 30	110-130	
5 37	75-82	37
6 37	82-100	
7 37	100-110	
8 37	110-130	

ПРАВИЛА УХОДА

Для поддержания функциональных свойств полотна необходим регулярный уход за изделием. Рекомендуется стирать Ваше изделие после 3-5 применений. Машинная стирка в деликатном режиме при температуре не выше 30°C.

Обращаться с осторожностью. Не применять хлорсодержащие средства. Глажение запрещено. Пропаривание и обработку паром не применять. Сухая чистка/химчистка запрещена. Удаление пятен растворителями запрещено.

Не применять сушку в барабане. Сушить не отжимая, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей.

Для изделий со съёмными или отстёгивающимися каркасами, шинами, рёбрами жёсткости или шарнирами: отсоединять данные съёмные элементы перед стиркой! После полного высыхания изделия следует вернуть их обратно.



СОСТАВ

54% полиэтилен, 36% полиамид, 7% эластан, 3% полиуретан.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Корсет должен храниться при комнатной температуре, в сухом помещении, вдали от источников тепла, прямого солнечного света и пыли.

УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

Корсет утилизировать с бытовым мусором.

СРОК ГОДНОСТИ

Срок годности не установлен. Возможность использования корсета дольше, чем предписано курсом лечения, должна быть согласована с врачом. Не допускается прекращение использования корсета без согласования с лечащим врачом. Не допускается самостоятельное изменение конструкции корсета. Не допускается эксплуатация поврежденного корсета.

По окончании периода использования товар не представляет опасности для потребителя и подлежит утилизации.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Ортопедическое изделие арт. BS-222(2), инструкция по применению.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

6 месяцев с момента продажи при соблюдении инструкции.

ГАРАНТИЙНЫМИ СЛУЧАЯМИ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ

- механические повреждения (включая случайные);
- повреждения, вызванные использованием товара не по назначению;
- дефекты, возникшие как следствие нарушения инструкции и правил ухода за изделием;
- несанкционированный ремонт или внесение изменений в конструкцию.

**К ВНЕШНЕМУ ВИДУ И ПОДБОРУ РАЗМЕРА
ПРЕТЕНЗИЙ НЕ ИМЕЮ**

Дата покупки: _____

Подпись покупателя: _____

Изделия протезно-ортопедические: ортезы на верхние конечности, корсеты ортопедические, корректоры осанки, реклинаторы: корсет ортопедический, арт. BS-222. Товар является медицинским изделием.

Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/09549 от 17.12.2021 г. выдано Росздравнадзором, срок действия не ограничен.

Производитель: Рехард Технолоджис ГмбХ, Германия, Rehard Technologies GmbH, 10785 Berlin, Potsdamer Str. 92, Germany.

Место производства: PRIM, S.A., C/Yolanda González 15, P.I. 1 28938 Móstoles. Madrid, Spain.

Импортёр/уполномоченный представитель в РФ: ООО «НИКАМЕД», Россия, 127015, Москва, Бумажный проезд, д. 14, стр. 2.

Претензии направлять: Россия, 127220, Москва, а/я № 58, ООО «НИКАМЕД», тел.: 8-800-33-33-112, e-mail: skk@nikamed.ru.

