

medical line



ORLETT

Зарегистрировано в Росздравнадзоре

Инструкция по применению
ортопедических изделий

ОРТЕЗ НА ЛОКТЕВОЙ СУСТАВ

HES-304



WWW.ORLETT.RU

СВОЙСТВА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Ортез Orlett, арт. HES-304, позволяет поэтапно расширять объем движений в локтевом суставе в период раннего функционального лечения в посттравматическом или послеоперационном периоде. Отпускается без рецепта.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- ранняя функциональная терапия в посттравматическом/послеоперационном периоде; в случаях, когда необходимо регулирование/ограничение движений в локтевом суставе;
- консервативная терапия травм локтевого сустава.

РЕЖИМ И СРОКИ НОШЕНИЯ

Режим и сроки ношения ортеза назначает лечащий врач. Изделие предназначено для многократного личного использования. Возможные последствия при использовании товара не по назначению не выявлены.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

- индивидуальная непереносимость материалов;
- гнойно-септические заболевания кожи в области применения ортеза.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Перед применением рекомендуется проконсультироваться со специалистом. При возникновении какого-либо физического дискомфорта или раздражения следует немедленно проконсультироваться с врачом о возможности дальнейшего применения ортеза.

ВНИМАНИЕ!

- необходимые углы сгибания-разгибания и диапазон движений выставляются только лечащим врачом;
- самостоятельное и бесконтрольное изменение установок шарниров пациентом недопустимо.

КОНСТРУКЦИЯ

Ортез Orlett на локтевой сустав с регулятором объёма движения, арт. HES-304, состоит из следующих элементов (цифры на рис. 1 соответствуют элементам конструкции):

1. Манжеты на плечо.
2. Манжеты на предплечье.
3. Четыре фиксирующих ремня с застежками-липучками велкро.
4. Две металлические шины с шарниром.
5. Ремень для удобства ношения ортеза.
6. Опора для кисти для удобства использования.

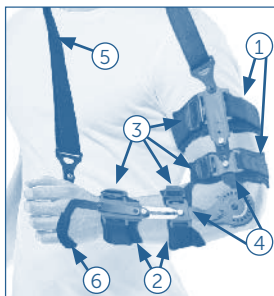


рис. 1

ПОРЯДОК НАДЕВАНИЯ

1. Полностью разобрать ортез (отстегнуть ремни-фиксаторы с застежками-липучками велкро, шины с шарнирами).
2. Установить необходимый диапазон движения или выставить угол сгибания-разгибания на шарнирах (см. порядок установки необходимого диапазона движения).
3. Закрепить соответствующие манжеты сначала на предплечье, потом на плече.
4. Закрепить ортез ремнями-фиксаторами с застежками-липучками велкро.

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ НЕОБХОДИМОГО ДИАПАЗОНА ДВИЖЕНИЯ ИЛИ УГЛА СГИБАНИЯ-РАЗГИБАНИЯ В ШАРНИРАХ

1. Сдвинуть защитный стопор в положение «ОТКРЫТО».
2. С помощью двух фиксаторов, передвигая их по часовой стрелке, установить требуемые значения для ограничения сгибания и разгибания в суставе.
3. Если нужно установить определенное значение для иммобилизации локтевого сустава, необходимо выставить требуемое значение на шкале иммобилизации шарнира.
4. Сдвинуть защитный стопор в положение «ЗАКРЫТО».
5. Если Вы хотите исключить сбой настроек, можно заблокировать фиксаторы установки значений кабельными стяжками из комплекта поставки ортеза.

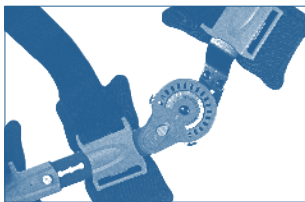


рис. 2

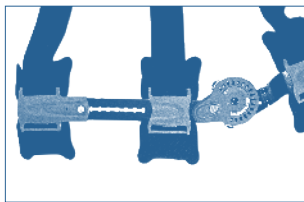


рис. 3

ПРАВИЛА ПОДБОРА

Ортез Orlett, арт. HES-304, имеет универсальный размер, производится в двух версиях: для правой и левой руки.

ПРАВИЛА УХОДА

Машинная стирка в деликатном режиме, при температуре не выше 40°C. Обращаться с осторожностью. Не применять хлорсодержащие средства. Глажение запрещено. Пропаривание и обработку паром не применять. Сухая чистка/химчистка запрещена.

Удаление пятен растворителями запрещено. Не применять сушку в барабане. Сушить не отжимая, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей.

Для изделий со съёмными или отстёгивающимися каркасами, шинами, рёбрами жёсткости или шарнирами: отсоединять данные съёмные элементы перед стиркой! После полного высыхания изделия следует вернуть их обратно.



СОСТАВ

65% алюминий, 8% сталь, 1% медь, 6% полиоксиметилен, 6% полиуретан, 4% полиамид, 4% нейлон, 2% цинк, 2% спандекс, 2% полиэстер.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Орtez должен храниться при комнатной температуре, в сухом помещении, вдали от источников тепла, прямого солнечного света и пыли.

УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

Орtez утилизировать с бытовым мусором.

СРОК ГОДНОСТИ

Срок годности не установлен.

Возможность использования ортеза дольше, чем предписано курсом лечения, должна быть согласована с врачом. Не допускается прекращение использования ортеза без согласования с лечащим врачом. Не допускается самостоятельное изменение конструкции ортеза. Не допускается эксплуатация поврежденного ортеза.

По окончании периода использования товар не представляет опасности для потребителя и подлежит утилизации.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Ортопедическое изделие арт. HES-304, инструкция по применению.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

6 месяцев с момента продажи при соблюдении инструкции.

ГАРАНТИЙНЫМИ СЛУЧАЯМИ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ

- механические повреждения (включая случайные);
- повреждения, вызванные использованием товара не по назначению;
- дефекты, возникшие как следствие нарушения инструкции по применению и правил ухода за изделием;
- несанкционированный ремонт или внесение изменений в конструкцию.

К ВНЕШНЕМУ ВИДУ И ПОДБОРУ РАЗМЕРА ПРЕТЕНЗИЙ НЕ ИМЕЮ

Дата покупки: _____

Подпись покупателя: _____



Изделия протезно-ортопедические: ортезы на верхние конечности, корсеты ортопедические, корректоры осанки, реклинаторы: ортезы на верхние конечности: на локтевой сустав: арт. HES-304.

Товар является медицинским изделием.

Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/09549 от 26.06.2014 г. выдано Росздравнадзором, срок действия не ограничен.

Декларация о соответствии № РОСС RU Д-DE.НА38.В.00222/20 (с 17.03.2020 г. по 16.03.2023 г.) выдана ООО «Сервис Плюс».

Производитель: Рехард Технолоджис ГмбХ, Германия, 10785, Берлин, Потсдамерштрассе, 92.

Импортер: ООО «Орто Медикл Групп», Россия, 143405, Московская область, г. Красногорск, Ильинское шоссе, д. 16, корп. 1.

Претензии направлять: Россия, 127220, Москва, а/я № 58, ООО «НИКАМЕД» представитель в России и СНГ, тел.: 8-800-33-33-112, e-mail: skk@nikamed.ru.

