

medical line



ORLETT

Зарегистрировано в Росздравнадзоре

Инструкция по применению
ортопедических изделий

**БАНДАЖ НА ШЕЙНЫЙ ОТДЕЛ
ПОЗВОНОЧНИКА (ШИНА ШАНЦА)**

MJ-500

MJ-400



WWW.ORLETT.RU

СВОЙСТВА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

- Стабилизация и разгрузка шейного отдела позвоночника.
- Ограничение подвижности в шейном отделе позвоночника.
- Фиксация положения головы и шеи в положении, снижающем нагрузку на мышцы и связочный аппарат.

Отпускается без рецепта.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Модель MJ-500 обеспечивает фиксацию сильной степени шейного отдела позвоночника за счет съемного пластикового пелота и основы из пенополиуретана.

Модель MJ-400 обеспечивает фиксацию средней степени за счет основы из пенополиуретана.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- Реабилитация после травм и операций на шейном отделе позвоночника.
- Болевой синдром в шейном отделе позвоночника.
- Остеохондроз и другие дегенеративные заболевания шейного отдела позвоночника.
- Вертебро-базилярная недостаточность.
- Миозит.
- Шейный корешковый синдром.

РЕЖИМ И СРОКИ НОШЕНИЯ

Режим и сроки ношения бандажей Orlett (шин Шанца) назначает лечащий врач. Изделие предназначено для многократного личного использования. Возможные последствия при использовании товара не по назначению не выявлены.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

- Индивидуальная непереносимость материалов бандажа для шейного отдела.

- Гнойно-септические заболевания кожи в области применения изделия.
- Открытые раны в области применения изделия.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

При появлении дискомфорта в области применения бандажа следует немедленно прекратить использование изделия и проконсультироваться с врачом относительно его дальнейшего применения.

ПОРЯДОК НАДЕВАНИЯ

Бандаж Orlett на шейный отдел позвоночника (шину Шанца) размещают у передней поверхности шеи так, чтобы подбородок расположился в выемке по середине верхнего края шины Шанца. Шину застёгивают на задней поверхности шеи с помощью застёжки-липучки велкро, обеспечив плотное прилегание бандажа Orlett к коже по всей окружности шеи.

ПРАВИЛА ПОДБОРА

Для корректного подбора бандажа Orlett на шейный отдел необходимо измерить сантиметровой лентой два параметра: окружность и высоту шеи. Первый параметр измеряется по длине окружности шеи у ее основания. Для определения второго параметра необходимо в вертикальном положении головы измерить расстояние от угла нижней челюсти до ключицы.

В соответствии с таблицей подбора размера подбирается нужный артикул (индекс) бандажа Orlett.

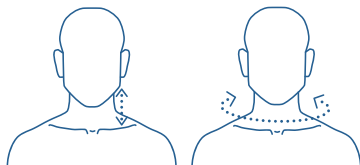


ТАБЛИЦА ПОДБОРА РАЗМЕРОВ

Артикул/индекс	Размеры, см	
	Окружность шеи	Высота шеи
1-8	27-36	8
2-8	36-46	8
1-10	27-36	10
2-10	36-46	10

Чтобы проверить правильность выбора размера, рекомендуется примерить изделие. Важно, чтобы бандаж был удобен.

ПРАВИЛА УХОДА

Правильный уход за бандажами Orlett на шейный отдел позвоночника позволяет сохранить лечебные свойства изделий в течение всего гарантийного срока службы изделия:

- стирать вручную при температуре не выше 30°C;
- не применять моющие и отбеливающие средства, содержащие хлор;
- не применять машинную стирку;
- отжимать не выкручивая;
- сушить вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей;
- сушить изделие рекомендуется в расправленном положении на горизонтальной поверхности.
- перед стиркой необходимо извлечь пластиковый пелот из модели MJ-500.



СОСТАВ

MJ-500: 32% этиленвинилацетат, 20% полиуретановая пена, 15% поливинилхлорид, 13% полиамид, 12% полиэстер, 8% полиэтилен.

MJ-400: 39% этиленвинилацетат, 35% полиуретановая пена, 18% полиэстер, 8% полиамид.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Изделие должно храниться при комнатной температуре, в сухом помещении, вдали от источников тепла, прямого солнечного света и пыли.

УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

Изделие утилизировать с бытовым мусором.

СРОК ГОДНОСТИ

Срок годности не установлен. Возможность использования изделия дольше, чем предписано курсом лечения, должна быть согласована с врачом. Не допускается прекращение использования изделия без согласования с лечащим врачом.

Не допускается самостоятельное изменение конструкции изделия. Не допускается эксплуатация поврежденного изделия.

По окончании периода использования товар не представляет опасности для потребителя и подлежит утилизации.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Бандаж MJ-500: ортопедическое изделие арт. MJ-500, инструкция по применению.

Бандаж MJ-400: ортопедическое изделие арт. MJ-400, инструкция по применению.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

6 месяцев с момента продажи при соблюдении инструкции.

ГАРАНТИЙНЫМИ СЛУЧАЯМИ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ

- механические повреждения (включая случайные);
- повреждения, вызванные использованием товара не по назначению;
- дефекты, возникшие как следствие нарушения инструкции по применению и правил ухода за изделием;
- несанкционированный ремонт или внесение изменений в конструкцию.

**К ВНЕШНЕМУ ВИДУ И ПОДБОРУ РАЗМЕРА
ПРЕТЕНЗИЙ НЕ ИМЕЮ**

Дата покупки: _____

Подпись покупателя: _____

Изделия протезно-ортопедические: бандажи ортопедические на верхние конечности: бандаж на шейный отдел позвоночника: арт. MJ-400, арт. MJ-500.

Товар является медицинским изделием.

Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/09551 от 30.01.2023 г. выдано Росздравнадзором, срок действия не ограничен.

Производитель: Рехард Технолджис ГмбХ, Германия, Rehard Technologies GmbH, 10785 Berlin, Potsdamer Str. 92, Germany.

Уполномоченный представитель в РФ: ООО «НИКАМЕД», Россия, 127015, Москва, Бумажный проезд, д. 14, стр. 2.

Импортёр: ООО «Орто Медикл Групп», Россия, 143405, Московская обл., г. Красногорск, Ильинское шоссе, д. 16, корп. 1.

Претензии направлять: Россия, 127220, Москва, а/я № 58, ООО «НИКАМЕД», тел.: 8-800-33-33-112, e-mail: skk@nikamed.ru.

