

medical line




ORLETT

Зарегистрировано в Росздравнадзоре

Инструкция по применению
ортопедических изделий

КОРСЕТ ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ НА ТАЗОВОЕ КОЛЬЦО

OBS-100

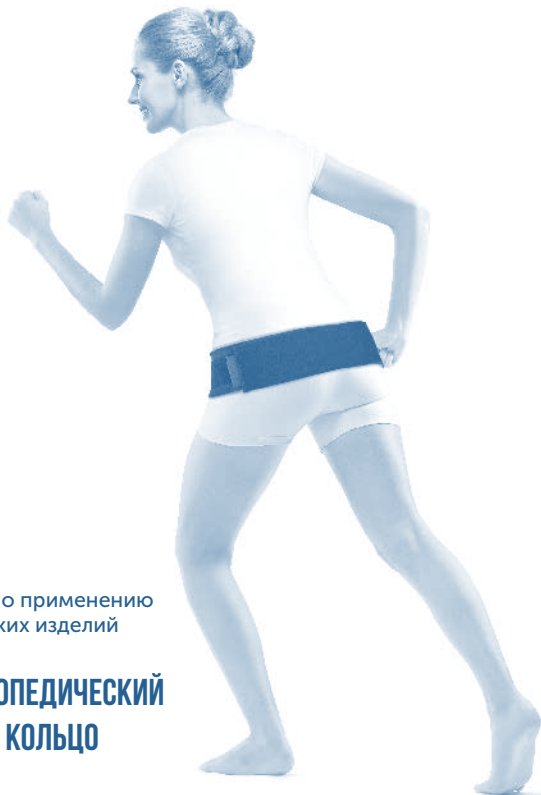

WWW.ORLETT.RU

СВОЙСТВА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Корсет ортопедический на тазовое кольцо ORLETT, арт. OBS-100, стабилизирует элементы тазового кольца и разгружает мышцы ягодичной области, благодаря чему снижается болевой синдром, устраняется мышечный спазм, снижается давление на седалищный нерв и предупреждается развитие неврологической симптоматики.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- Артроз крестцово-подвздошного сочленения.
- Сакроилеит.
- Ишиас.
- Синдром грушевидной мышцы.

РЕЖИМ И СРОКИ НОШЕНИЯ

Режим и сроки ношения корсета назначает лечащий врач.

Изделие предназначено для многократного личного использования. Возможные последствия при использовании товара не по назначению не выявлены.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

- индивидуальная непереносимость материалов;
- гнойно-септические заболевания кожи в области применения корсета.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Перед применением рекомендуется проконсультироваться со специалистом.

В случаях гнойных заболеваний и/или заболеваний кожи в области применения корсета необходима консультация лечащего врача.

При возникновении какого-либо физического дискомфорта или раздражения следует немедленно проконсультироваться у врача о возможности дальнейшего применения корсета.

КОНСТРУКЦИЯ

Цифры на рис. 1, 2 соответствуют следующим элементам конструкции:

1. Фиксирующий пояс корсета с застежкой-липучкой micro velcro.
2. Дополнительные фиксирующие ремни.

ПОРЯДОК НАДЕВАНИЯ

Корсет надевается лежа на спине.

1. Фиксирующий пояс надеть так, чтобы он в застегнутом состоянии проходил по линии таза. Для точной посадки по фигуре стоит ориентироваться на наиболее выступающие точки ягодиц (рис. 1).
2. Зафиксировать корсет дополнительными фиксирующими ремнями (рис. 2).

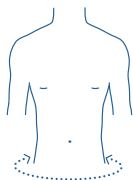


рис. 1



рис. 2

ПРАВИЛА ПОДБОРА



Для корректного подбора корсета ортопедического Orlett необходимо измерить сантиметровой лентой плотно, но не утягивая, окружность бедер. Измерения обхвата бедер производят по наиболее выступающим точкам ягодиц. Согласно полученным результатам подобрать корсет по таблице подбора размеров.

ТАБЛИЦА ПОДБОРА РАЗМЕРОВ

Размер	Окружность бедер, см
S	76-86
M	86-102
L	102-117
XL	117-132

Чтобы проверить правильность выбора размера, рекомендуется примерить корсет. Важно, чтобы корсет был удобен.

ПРАВИЛА УХОДА

Для поддержания функциональных свойств полотна необходим регулярный уход за изделием. Рекомендуется стирать Ваше изделие после 3-5 применений. Машинная стирка в деликатном режиме при температуре не выше 30°C. Обращаться с осторожностью. Не применять хлорсодержащие средства. Глажение запрещено. Пропаривание и обработку паром не применять. Сухая чистка/химчистка запрещена.

Удаление пятен растворителями запрещено. Не применять сушку в барабане.

Сушить не отжимая, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей.

Для изделий со съёмными или отстёгивающимися каркасами, шинами, рёбрами жёсткости или шарнирами: отсоединять данные съёмные элементы перед стиркой! После полного высыхания изделия следует вернуть их обратно.



СОСТАВ

55% полиуретан, 25% полиэстер, 20% полиамид.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Корсет должен храниться при комнатной температуре, в сухом помещении, вдали от источников тепла, прямого солнечного света и пыли.

УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

Корсет утилизировать с бытовым мусором.

СРОК ГОДНОСТИ

Срок годности не установлен. Возможность использования корсета дольше, чем предписано курсом лечения, должна быть согласована с врачом. Не допускается прекращение использования корсета без согласования с лечащим врачом. Не допускается самостоятельное изменение конструкции корсета. Не допускается эксплуатация поврежденного корсета.

По окончании периода использования товар не представляет опасности для потребителя и подлежит утилизации.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Ортопедическое изделие арт. OBS-100, инструкция по применению.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

6 месяцев с момента продажи при соблюдении инструкции.

ГАРАНТИЙНЫМИ СЛУЧАЯМИ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ

- механические повреждения (включая случайные);
- повреждения, вызванные использованием товара не по назначению;
- дефекты, возникшие как следствие нарушения инструкции и правил ухода за изделием;
- несанкционированный ремонт или внесение изменений в конструкцию.

**К ВНЕШНЕМУ ВИДУ И ПОДБОРУ РАЗМЕРА
ПРЕТЕНЗИЙ НЕ ИМЕЮ**

Дата покупки: _____

Подпись покупателя: _____

Изделия протезно-ортопедические: ортезы на верхние конечности, корсеты ортопедические, корректоры осанки, реклинаторы: ортезы на верхние конечности: корсет ортопедический, арт. OBS-100.

Товар является медицинским изделием.

Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/09549 от 14.07.2023 г. выдано Росздравнадзором, срок действия не ограничен.

Производитель: Рехард Технолоджис ГмбХ, Германия, Rehard Technologies GmbH, 10785 Berlin, Potsdamer Str. 92, Germany.

Импортёр/уполномоченный представитель в РФ: ООО «НИКАМЕД», Россия, 127015, Москва, Бумажный проезд, д. 14, стр. 2.

Претензии направлять: Россия, 127220, Москва, а/я № 58, ООО «НИКАМЕД», тел.: 8-800-33-33-112, e-mail: skk@nikamed.ru.

