


medical line



ORLETT

Зарегистрировано в Росздравнадзоре

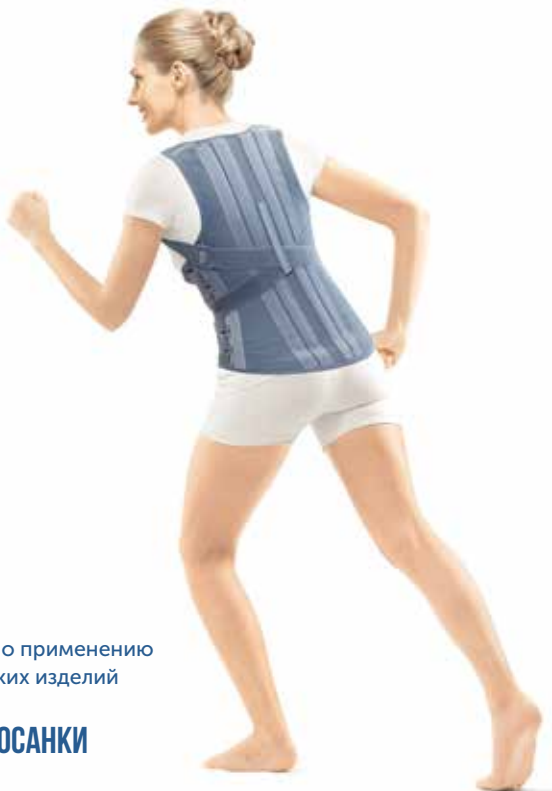

Инструкция по применению
ортопедических изделий

КОРРЕКТОР ОСАНКИ

TLSO-361(F)

WWW.ORLETT.RU

СВОЙСТВА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Корректор осанки ORLETT, арт. TLSO-361(F), поэтапно корригирует гиперкифоз, способствует формированию стереотипа правильной осанки. Корректор стабилизирует и разгружает грудно-поясничный отдел позвоночника и нормализует тонус мышц, участвующих в удержании положения тела.

Отпускается без рецепта.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ

- компенсирует дефицит опорности;
- нормализует тонус мышц проблемных участков спины;
- снижает нагрузки на межпозвонковые диски.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- Остеопороз I-II степени.
- Функциональный гиперкифоз.
- Юношеский гиперкифоз (болезнь Шейермана-May).
- Посттравматический гиперкифоз.
- Последствия воспалительных заболеваний (болезнь Бехтерева).

РЕЖИМ И СРОКИ НОШЕНИЯ

Режим и сроки ношения корректора осанки определяет лечащий врач в зависимости от заболевания, его стадии и степени выраженности.

Изделие предназначено для многократного личного использования. Возможные последствия при использовании товара не по назначению не выявлены.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

- индивидуальная непереносимость материалов;
- гнойно-септические заболевания кожи в области применения корректора.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Перед применением рекомендуется проконсультироваться со специалистом. Людям, имеющим заболевания кожи, перед использованием корректора осанки необходимо проконсультироваться с врачом.

При возникновении какого-либо физического дискомфорта или раздражения следует проконсультироваться с врачом о возможности дальнейшего применения корректора осанки.

ВНИМАНИЕ!

Не следует затягивать корректор осанки слишком сильно во избежание нарушения дыхания.

КОНСТРУКЦИЯ



рис. 1

Корректор осанки ортопедический Orlett, арт. TLSO-361(F), состоит из следующих элементов (цифры на рисунке соответствуют элементам конструкции):

1. пояс корректора;
2. малоэластичная спинка;
3. металлические ребра жесткости;
4. наплечные растяжимые в одном направлении ремни;
5. система фиксирующих ремней.

ПОРЯДОК НАДЕВАНИЯ

1. Корректор осанки закрепить на животе поясом с застежкой велкро (рис. 2).
2. Расположить ребра жесткости симметрично относительно позвоночного столба. Пропустить лямки корректора под мышками и перекрестить их на спине (рис. 3).
3. Расправить плечи и зафиксировать положение плечевого пояса, застегнув лямки с застежками-липучками велкро на животе (рис. 2).

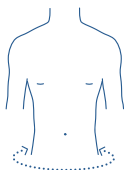


рис. 2



рис. 3

ПРАВИЛА ПОДБОРА



Для подбора размера корректора осанки сантиметровой лентой плотно, но не утягивая, измеряется окружность бедер.

Согласно полученным результатам подобрать корректор осанки Orlett по таблице подбора размеров.

ТАБЛИЦА ПОДБОРА РАЗМЕРОВ

Размер	Окружность бедер, см	Высота абдоминальной панели, см	Высота спинки, см
XS	70-85	23	55
S	80-95		
M	90-105		
L	100-115		
XL	110-125		
XXL	120-135		

Чтобы проверить правильность выбора размера, рекомендуется примерить корректор осанки. Важно, чтобы корректор осанки был удобен.

ПРАВИЛА УХОДА

Для поддержания функциональных свойств полотна необходим регулярный уход за изделием. Рекомендуется стирать Ваше изделие после 3-5 применений. Машинная стирка в деликатном режиме при температуре не выше 40°C. Обращаться с осторожностью. Не применять хлорсодержащие средства. Глажение запрещено. Пропаривание и обработку паром не применять.

Сухая чистка/химчистка запрещена. Удаление пятен растворителями запрещено. Не применять сушку в барабане.

Сушить не отжимая, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей.

Для изделий со съёмными или отстёгивающимися каркасами, шинами, рёбрами жёсткости или шарнирами: отсоединять данные съёмные элементы перед стиркой! После полного высыхания изделия следует вернуть их обратно.



СОСТАВ

21% сталь, 43% полиамид, 11% полиэстер, 8% полиуретан, 9% эластан, 5% полипропилен, 2% полиоксиметилен, 1% хлопок.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Корректор осанки должен храниться при комнатной температуре, в сухом помещении, вдали от источников тепла, прямого солнечного света и пыли.

УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

Корректор осанки утилизировать с бытовым мусором.

СРОК ГОДНОСТИ

Срок годности не установлен.

Возможность использования корректора осанки дольше, чем предписано курсом лечения, должна быть согласована с врачом.

Не допускается прекращение использования корректора осанки без согласования с лечащим врачом. Не допускается самостоятельное изменение конструкции корректора осанки. Не допускается эксплуатация поврежденного корректора осанки. По окончании периода использования товар не представляет опасности для потребителя и подлежит утилизации.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Ортопедическое изделие арт. TLSO-361(F), инструкция по применению.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

6 месяцев с момента продажи при соблюдении инструкции.

ГАРАНТИЙНЫМИ СЛУЧАЯМИ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ

- механические повреждения (включая случайные);
- повреждения, вызванные использованием товара не по назначению;
- дефекты, возникшие как следствие нарушения инструкции и правил ухода за изделием;
- несанкционированный ремонт или внесение изменений в конструкцию.

**К ВНЕШНЕМУ ВИДУ И ПОДБОРУ РАЗМЕРА
ПРЕТЕНЗИЙ НЕ ИМЕЮ**

Дата покупки: _____

Подпись покупателя: _____

Изделия протезно-ортопедические: ортезы на верхние конечности, корсеты ортопедические, корректоры осанки, реклинаторы: корректоры осанки: арт. TLSO-361(F).

Товар является медицинским изделием.

Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/09549 от 17.12.2021 г. выдано Росздравнадзором, срок действия не ограничен.

Производитель: Рехард Технолджис ГмбХ, Германия, Rehard Technologies GmbH, 10785 Berlin, Potsdamer Str. 92, Germany.

Место производства: PRIM, S.A., C/Yolanda González 15, P.I. 1 28938 Móstoles. Madrid, Spain.

Импортёр/уполномоченный представитель в РФ: ООО «НИКАМЕД», Россия, 127015, Москва, Бумажный проезд, д. 14, стр. 2.

Претензии направлять: Россия, 127220, Москва, а/я № 58, ООО «НИКАМЕД», тел.: 8-800-33-33-112, e-mail: skk@nikamed.ru.

