

junior line



Зарегистрировано в Росздравнадзоре

Инструкция по применению
ортопедических изделий

**РЕКЛИНАТОР
ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ**

CS-160(P)



WWW.ORLETT.RU

СВОЙСТВА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Ключичная повязка (реклинатор), арт. CS-160(P), представляет собой высокотехнологичный вариант колец Дельбе, предназначенных для консервативного лечения неосложненных переломов ключицы у детей; обеспечивает надежное репонирование и пострепозиционную фиксацию ключиц. Ключичная повязка также применяется при иных повреждениях и заболеваниях грудинно-ключичного сочленения.

Благодаря тому, что повязка обеспечивает эффективное отведение плеч кзади, смещая углы лопаток к позвоночнику, она может применяться в качестве реклинатора при различных нарушениях осанки. В результате применения повязки за счет выпрямления позвоночника уменьшается напряжение мышц плечевого пояса, исключается воздействие мышечного гипертонуса на ключицы и позвоночник. Отпускается без рецепта.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- лечение переломов ключицы;
- травмы акромиально-ключичного сочленения;
- воспалительно-дегенеративные поражения акромиально-ключичного сочленения;
- тендомиопатии;
- сколиоз I-II ст. грудного отдела позвоночника;
- различные виды нарушения осанки у детей.

РЕЖИМ И СРОКИ НОШЕНИЯ

Режим и сроки ношения реклинатора назначает лечащий врач. Изделие предназначено для многократного личного использования. Возможные последствия при использовании товара не по назначению не выявлены.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

- индивидуальная непереносимость материалов;
- гнойные заболевания и заболевания кожи в области применения реклинатора.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Перед применением рекомендуется проконсультироваться со специалистом.


Людям, имеющим заболевания кожи, перед использованием реклинатора необходимо проконсультироваться с врачом.

Людям с чувствительной кожей следует надевать реклинатор на нательное белье, плотно прилегающее к телу.

При возникновении какого-либо физического дискомфорта или раздражения следует проконсультироваться с врачом о возможности его дальнейшего применения.

КОНСТРУКЦИЯ


Ключичная повязка представляет собой фиксирующую систему, состоящую из пелота и системы фиксирующих ремней, крепящихся тремя застежками велкро.

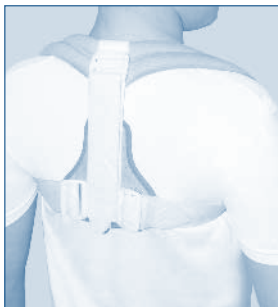

ПОРЯДОК НАДЕВАНИЯ

Ключичную повязку надевать непосредственно на тело или на майку. Пелот наложить на межлопаточную область. Фиксирующие ремни продеть в пряжки, расположенные в пелоте. Наплечные ремни натянуть и зафиксировать с помощью застежек-липучек велкро в положении, обеспечивающем разведение плеч.

ПРАВИЛА ПОДБОРА

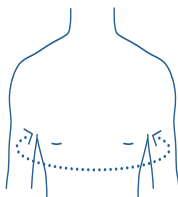

Сантиметровой лентой плотно, но не утягивая, измеряется окружность грудной клетки на уровне подмышечных впадин.

Согласно полученным результатам подобрать реклинатор по таблице подбора размеров.

ТАБЛИЦА ПОДБОРА РАЗМЕРОВ

Размер	Окружность грудной клетки, см
S/M	50-65
L/XL	65-80

Чтобы проверить правильность выбора размера, рекомендуется примерить изделие. Важно, чтобы реклинатор был удобен.

СОСТАВ

55% полиамид, 25% полиуретан, 5% полиэстер, 15% полиоксиметилен.

ПРАВИЛА УХОДА

Для поддержания функциональных свойств полотна необходим регулярный уход за изделием. Рекомендуется стирать Ваше изделие после 3-5 применений. Только ручная стирка. Машинную стирку не применять. Максимальная температура 40°C. Обращаться с осторожностью. Не применять хлорсодержащие средства. Глажение запрещено. Пропаривание и обработку паром не применять. Сухая чистка/химчистка запрещена. Удаление пятен растворителями запрещено. Не применять сушку в барабане. Сушить не отжимая, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей.



УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Реклинатор должен храниться при комнатной температуре, в сухом помещении, вдали от источников тепла, прямого солнечного света и пыли.

УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

Реклинатор утилизировать с бытовым мусором.

СРОК ГОДНОСТИ

Срок годности не установлен.

Возможность использования реклинатора дольше, чем предписано курсом лечения, должна быть согласована с врачом. Не допускается прекращение использования реклинатора без согласования с лечащим врачом. Не допускается самостоятельное изменение конструкции реклинатора. Не допускается эксплуатация поврежденного реклинатора.

По окончании периода использования товар не представляет опасности для потребителя и подлежит утилизации.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Ортопедическое изделие арт. CS-160(P), инструкция по применению.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

6 месяцев с момента продажи при соблюдении инструкции.

ГАРАНТИЙНЫМИ СЛУЧАЯМИ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ

- механические повреждения (включая случайные);
- повреждения, вызванные использованием товара не по назначению;
- дефекты, возникшие как следствие нарушения инструкции по применению и правил ухода за изделием;
- несанкционированный ремонт или внесение изменений в конструкцию.

К ВНЕШНЕМУ ВИДУ И ПОДБОРУ РАЗМЕРА ПРЕТЕНЗИЙ НЕ ИМЕЮ

Дата покупки: _____

Подпись покупателя: _____

Изделия протезно-ортопедические: ортезы на верхние конечности, корсеты ортопедические, корректоры осанки, реклинаторы: реклинатор, арт. CS-160(P).

Товар является медицинским изделием.

Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/09549 от 14.07.2023 г. выдано Росздравнадзором, срок действия не ограничен.

Производитель: Рехард Технолджис ГмбХ, Германия, Rehard Technologies GmbH, 10785 Berlin, Potsdamer Str. 92, Germany.

Импортер: ООО «Орто Медикл Групп», Россия, 143405, Московская обл., г. Красногорск, Ильинское шоссе, д. 16, корп. 1.

Уполномоченный представитель в РФ: ООО «НИКАМЕД», Россия, 127015, Москва, Бумажный проезд, д. 14, стр. 2.

Претензии направлять: Россия, 127220, Москва, а/я № 58, ООО «НИКАМЕД», тел.: 8-800-33-33-112, e-mail: skk@nikamed.ru.

