

medical line



ORLETT

Зарегистрировано в Росздравнадзоре



Инструкция по применению
ортопедических изделий

ОРТЕЗ НА ГОЛЕНОСТОПНЫЙ СУСТАВ

TAN-201 A

WWW.ORLETT.RU

СВОЙСТВА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Ортез ORLETT на голеностопный сустав, арт. TAN-201 А (динамический стоподержатель), удерживает стопу в положении тыльного (подошвенного) сгибания и способствует самостоятельному передвижению пациентов.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Недостаточность тыльного сгибания стопы при парезах и параличах передней группы мышц голени (инсульты, болезнь Паркинсона, повреждения головного мозга, рассеянный склероз, нейромышечная атрофия, поражения седалищного и малоберцового нервов вследствие травмы, нарушения кровоснабжения, перенесенных инфекций и др.).

РЕЖИМ И СРОКИ НОШЕНИЯ

Режим и сроки ношения ортеза назначает лечащий врач. Изделие предназначено для многократного личного использования. Возможные последствия при использовании товара не по назначению не выявлены.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

- Индивидуальная непереносимость материалов.
- Гнойно-септические поражения кожи в области применения ортеза.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Перед применением рекомендуется проконсультироваться со специалистом. Людям, имеющим заболевания кожи, перед использованием ортеза необходимо проконсультироваться у врача.

Людям с чувствительной кожей следует надевать ортез на хлопчатобумажный носок, плотно прилегающий к телу или эластичный бандаж легкой степени фиксации (например, эластичный бандаж Orlett на голеностопный сустав). При возникновении какого-либо физического дискомфорта или раздражения следует немедленно проконсультироваться с врачом о возможности дальнейшего применения ортеза.



ВНИМАНИЕ!

Ортез предназначен для ношения как с различными видами обуви, так и без нее.

КОНСТРУКЦИЯ

Буквы на рисунках соответствуют следующим элементам конструкции:

- А — деталь на голень.
- В — деталь на свод стопы.
- С — эластичная деталь.
- Д — вставка с металлическим крючком.
- Е — крючки для фиксации.

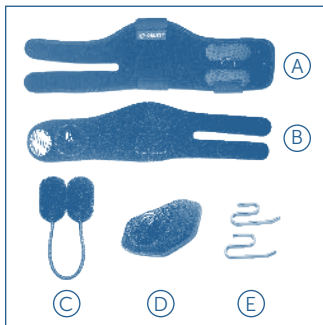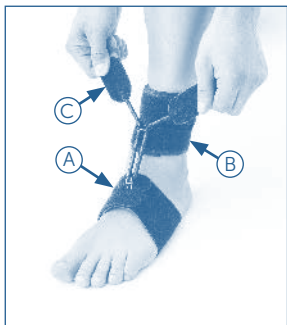

ПОРЯДОК НАДЕВАНИЯ

Для ношения без обуви

1. Деталь на голень «А» разместите над выступающими косточками голеностопного сустава, чтобы амортизирующая подушка располагалась на ахилловом сухожилии. Логотип должен располагаться сверху. Отрегулировав натяжение, застегните деталь «А» с помощью застежки «велкро». Обратите внимание, чтобы металлическое кольцо было обращено к стопе, а прорезиненный валик был под кольцом.

2. Деталь на свод стопы «В» разместите под стопой, по центру, так чтобы вершина треугольной амортизационной подушки была развернута по направлению к пятке. Отрегулировав натяжение, застегните деталь «В» с помощью застежки «велкро». Металлический крючок должен оказаться сверху стопы, при этом его изгиб должен быть развернут к ноге.
3. Сложив вдвое эластичную деталь «С», вденьте её в металлическое кольцо на детали «А» и закрепите за металлический крючок на детали «В». Отрегулируйте натяжение и закрепите края детали «С» на детали «А» с помощью застежек «велкро».

Для ношения с обувью

1. Деталь на голень «А» разместите над выступающими косточками голеностопного сустава, чтобы амортизирующая подушка располагалась на ахилловом сухожилии. Логотип должен располагаться сверху. Отрегулировав натяжение, застегните деталь «А» с помощью застежки «велкро». Обратите внимание, чтобы металлическое кольцо было обращено к стопе, а прорезиненный валик был под кольцом.
2. Возьмите вставку с металлическим крючком «Д» и разместите её по центру стопы, широкой стороной вверх между «язычком» и шнуровкой обуви. Убедитесь, что деталь «Д» надежно закреплена, а изгиб металлического крючка развернут к ноге.
3. Сложив вдвое эластичную деталь «С», вденьте её в металлическое кольцо на детали «А» и закрепите за металлический крючок на детали «Д». Отрегулируйте натяжение и закрепите края детали «С» на детали «А» с помощью застежек «велкро».

Для ношения с обувью и металлическими крючками

1. Деталь на голень «А» разместите над выступающими косточками голеностопного сустава, чтобы амортизирующая подушка располагалась на ахилловом сухожилии. Логотип должен располагаться сверху. Отрегулировав натяжение, застегните деталь «А» с помощью застежки «велкро». Обратите внимание, чтобы металлическое кольцо было обращено к стопе, а прорезиненный валик был под кольцом.
2. Возьмите металлический крючок «Е» и вставьте его в отверстие для шнурков обуви. Обратите внимание, длинная часть крючка «Е» должна быть внутри обуви, а его изгиб обращен к ноге. Возьмите второй металлический крючок «Е» и повторите то же самое действие с другой стороны язычка обуви.

3. Сложив вдвое эластичную деталь «С», вдените её в металлическое кольцо на детали «А» и закрепите за металлические крючки на обуви. Отрегулируйте натяжение и закрепите края детали «С» на детали «А» с помощью застежек «велкро».

ПРАВИЛА ПОДБОРА



Для корректного подбора ортеза необходимо измерить сантиметровой лентой плотно, но не утягивая, окружность подъема стопы.

Согласно полученным результатам подобрать ортез TAN-201 A по таблице подбора размеров.

ТАБЛИЦА ПОДБОРА РАЗМЕРОВ

Размер	S	M	L
Окружность подъема стопы, см	17-21	21-25	25-29

Чтобы проверить правильность выбора размера, рекомендуется примерить ортез. Важно, чтобы ортез был удобен.

ПРАВИЛА УХОДА

Обращаться с осторожностью. Только ручная стирка. Машинную стирку не применять. Стирать в прохладной воде с мягкими моющими средствами. Не применять хлорсодержащие средства. Удаление пятен растворителями запрещено. Не применять глажение и обработку паром. Сухая чистка/химчистка запрещена. Не применять сушку в барабане. Сушить не отжимая, в развернутом виде на плоской поверхности, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей.



СОСТАВ

44% полиамид, 22% полихлоропрен, 14% полиэстер, 7% полиэтилен, 7% железо, 4% латекс, 1% эластан, 1% пенополиуретан.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Ортез должен храниться при комнатной температуре, в сухом помещении, вдали от источников тепла, прямого солнечного света и пыли.

УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

Ортез утилизировать с бытовым мусором.

СРОК ГОДНОСТИ

Срок годности не установлен.

Возможность использования ортеза дольше, чем предписано курсом лечения, должна быть согласована с врачом. Не допускается прекращение использования ортеза без согласования с лечащим врачом. Не допускается самостоятельное изменение конструкции ортеза. Не допускается эксплуатация поврежденного ортеза.

По окончании периода использования товар не представляет опасности для потребителя и подлежит утилизации.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Ортопедическое изделие арт. TAN-201 А (подошвенная часть – 1 шт.; лодыжечная часть – 1 шт.; крючок для фиксации в обуви – 2 шт.; крючок для фиксации – 4 шт.; приводящая петля – 1 шт.), инструкция по применению.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

6 месяцев с момента продажи ортеза при соблюдении инструкции.

ГАРАНТИЙНЫМИ СЛУЧАЯМИ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ

- механические повреждения (включая случайные);
- повреждения, вызванные использованием товара не по назначению;
- дефекты, возникшие как следствие нарушения инструкции по применению и правил ухода за изделием;
- несанкционированный ремонт или внесение изменений в конструкцию.

**К ВНЕШНЕМУ ВИДУ И ПОДБОРУ РАЗМЕРА
ПРЕТЕНЗИЙ НЕ ИМЕЮ**

Дата покупки: _____

Подпись покупателя: _____

Изделия протезно-ортопедические: ортезы на нижние конечности: на голеностопный сустав: арт. TAN-201 А.

Товар является медицинским изделием.

Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/09552 от 17.12.2021 г. выдано Росздравнадзором, срок действия не ограничен.

Производитель: Рехард Технолоджис ГмбХ, Германия, Rehard Technologies GmbH, 10785 Berlin, Potsdamer Str. 92, Germany.

Импортер: ООО «Орто Медикл Групп», Россия, 143405, Московская обл., г. Красногорск, Ильинское шоссе, д. 16, корп. 1.

Уполномоченный представитель в РФ: ООО «НИКАМЕД», Россия, 127015, Москва, Бумажный проезд, д. 14, стр. 2.

Претензии направлять: Россия, 127220, Москва, а/я № 58, ООО «НИКАМЕД», тел.: 8-800-33-33-112, e-mail: skk@nikamed.ru.

