

УТИЛИЗАЦИЯ:
Данное изделие следует утилизировать отдельно от бытовых отходов.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Массажер для стоп и лодыжек «БЛАЖЕНСТВО АЛЬФА» графит
KZ 1181

Материал: АБС, полиэстер.
Цвет: графит.
Размер: 50х36,5х24,2 см.
Мощность: 35 Вт.
Работает от сети: 110-220 В, 50 Гц.
Температура прогрева: 50°C.
Автоматическое отключение: 15 мин.
Комплектация: массажер – 1 шт., пульт дистанционного управления (работает от батареек CR2025 – 1 шт, в комплект не входит) – 1 шт., инструкция.

Срок эксплуатации: 1 год с начала эксплуатации.
Гарантийный срок: 1 год.
Дату производства смотрите на упаковке.

ТОВАР НЕ ЯВЛЯЕТСЯ МЕДИЦИНСКИМ ИЗДЕЛИЕМ.



Служба заботы о клиентах



Перед началом эксплуатации ознакомьтесь с инструкцией



Храните в местах, недоступных для детей и животных

Произведено по заказу «BRADEX» ISRAEL.
Trans East Metal Ltd, POB 9101, Haifa 31091, Israel.
Tel: +972-4-8521824, fax: +972-3-7256059. www.bradex.co.il

Импортёр на территории РФ:

ООО «Технологии здоровья», Российская Федерация, 117405, Москва, ул. Варшавское шоссе, д.145, корп. 8. Тел.: 8 (495) 647-09-59, 8 (495) 648-26-66, www.bradex.ru

Импортёр на территории Республики Беларусь:

ООО «БРАДЕХ», 220019, г. Минск, ул. Монтанжников, д. 9 комн. 34/4.
УНП 192409754.
Сайт: www.bradex.by. E-mail: info@bradex.by.

Страна происхождения: Китай

Изготовитель: Джецзян Нью Вижн Импорт энд Экспорт Кампани Лимитед.
Адрес: Синьцзянь Роуд, 5, Индустриальная зона Бэйтанг, город Нинбо, КНР, 315708. Тел: +86-574-6560937.
факс: +86-574-6560938, e-mail: zhejiangnewvision.china@gmail.com

Международная торговая марка «BRADEX».

Per. №1419183
Израиль - Per. №204012
Россия - Per. №444287, №683532



KZ 1176
МАССАЖЕР ДЛЯ СТОП И ЛОДЫЖЕК
БЛАЖЕНСТВО ДРИМ

KZ 1174
ИМПУЛЬСНЫЙ МАССАЖЕР
ДЛЯ ЛИЦА, ТЕЛА И ВОЛОС
С 4 НАСАДКАМИ С АРГОНОМ
ДАРСОНВАЛЬ

KZ 1178
МАССАЖНАЯ ПОДУШКА ДЛЯ ТЕЛА
РЕЛЬЕФ КОМФОРТ

МАССАЖЕР ДЛЯ СТОП И ЛОДЫЖЕК БЛАЖЕНСТВО АЛЬФА

BRADEX
Health & Beauty

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

KZ 1181



BRADEXRUSSIA

BRADEXMOSCOW



Спасибо за покупку нашей продукции.

Пожалуйста, внимательно прочитайте руководство по эксплуатации перед использованием, особенно раздел «Меры предосторожности», изучите правила применения и функции работы прибора, чтобы использовать его правильно и безопасно.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

1. До включения массажера проверьте, соответствует ли источник питания техническим характеристикам, указанным для этого прибора.
2. Перед каждым использованием обязательно проверяйте массажер и его компоненты на отсутствие повреждений. Если обнаружили неисправности или повреждения, не используйте устройство и обратитесь к фирме-продавцу или в Службу заботы о клиентах, указанную на сайте производителя. Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать прибор.
3. Не оставляйте массажер без присмотра во включенном состоянии, особенно в присутствии детей.
4. Не допускайте использования массажера детьми, а также лицами, имеющими физические и умственные ограничения без помощи ответственных за их безопасность лиц.
5. Не накрывайте и не используйте массажер в местах с недостаточной вентиляцией. Перегрев прибора может привести к его поломке.
6. Не используйте массажер в помещениях с повышенной влажностью, в том числе в ванных комнатах. Не погружайте устройство в воду, так как оно не является водонепроницаемым. Не допускайте попадания воды на панель управления.
7. Не эксплуатируйте массажер, если на него попала вода или другая жидкость. В случае попадания жидкости, выключите устройство из сети и дождитесь полного высыхания.
8. Держите сетевую кабель вдали от источников тепла, не тяните за него. Никогда не беритесь за кабель мокрыми или влажными руками, чтобы избежать риска поражения электрическим током.
9. Не садитесь на массажер, не вставляйте ногами и не помещайте на него посторонние предметы.
10. Не засыпайте во время использования массажера.
11. Не используйте массажер после употребления алкоголя.
12. Не используйте массажер в сочетании со следующим медицинским оборудованием:
 - Кардиостимуляторы и другие имплантируемые медицинские электронные устройства;
 - Медицинское оборудование для поддержания жизни, такое как сердечно-легочное;
 - Медицинское электронное оборудование (для временной диагностики), такое как аппарат ЭКГ, закрепляемый на пациенте для мониторингирования данных работы сердца.
13. Не храните и не используйте массажер при температуре воздуха выше 60°C.
14. Во избежание перегрева массажера, не используйте его в непрерывном режиме более 30 минут. Делайте перерывы между применениями, чтобы прибор успевал полностью остыть.
15. Выходя из дома, выключите массажер из сети.

Соблюдение этих мер предосторожности гарантирует безопасное использование массажера.

ВАЖНО!

1. Не рекомендуется использование массажера маленькими детьми с неокрепшим опорно-двигательным аппаратом.
2. Устройство в процессе работы нагревается, поэтому людям, нечувствительным к теплу нужно быть особенно аккуратными.
3. Следите за тем, чтобы дети не использовали массажер в качестве игрушки.
4. Рекомендуется выпить не менее 500 мл воды, чтобы стимулировать обмен веществ в организме.
5. Отключайте массажер из сети питания после каждого использования.
6. Если в процессе использования массажера вы почувствуете дискомфорт немедленно прекратите использование прибора.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

Во избежание неприятных последствий, перед использованием массажера следует учесть ряд противопоказаний, запрещающих использование прибора:

- гиперчувствительность кожи и кожные заболевания;
- острые гнойные воспаления, наличие ран и воспаленных участков (переломов, ушибов, порезов) в местах воздействия;
- грибковые поражения стопы;
- нарушения кровообращения: тромбоз, флебит, варикозное расширение вен и др.;
- опухоли различного рода;
- онкологические заболевания;
- склонность к тромбообразованию;
- диабет;
- сердечно-сосудистые заболевания;
- гипертония и другие проблемы с артериальным давлением.
- недавно перенесенные травмы или операции;
- наличие простуды с повышенной температурой, лихорадочное состояние;
- беременность;
- наличие в организме кардиостимуляторов и электронных имплантатов;
- эпилепсия, расстройство сознания, туберкулез.

В каждом из перечисленных случаев требуется консультация врача.

Массажер разработан специально для взрослых.
Не является медицинским изделием.

Помните, что забота о своем теле и здоровье должны быть повседневной практикой.


ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:

Массажер для стоп и лодыжек «БЛАЖЕНСТВО АЛЬФА»
Артикул KZ 1181


Комплектация:
Массажер – 1 шт.
Пульт дистанционного управления – 1 шт.

В китайской медицине стопа рассматривается как отражение всего организма и содержит большое количество активных (акупунктурных) точек, которые могут влиять на здоровье и благополучие различных органов и систем организма. Это основной принцип рефлексотерапии. Большинство современных людей страдает от недостатка физической активности. Неправильно подобранная обувь может привести к длительному напряжению и дискомфорту в ногах. Массаж акупунктурных точек стопы с легкостью поможет справиться с этими проблемами, снимет напряжение и усталость ног.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

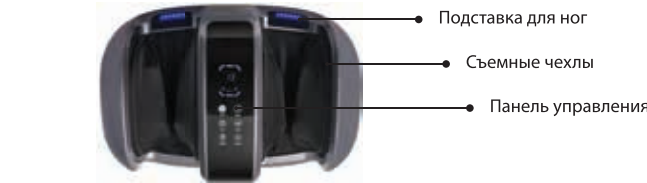

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ НА УСТРОЙСТВЕ:

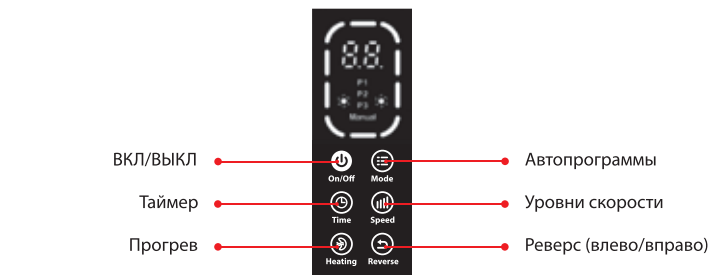

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ:




ПРИМЕНЕНИЕ:

1. Выберите подходящее место для массажа. Удобно расположитесь.
 2. Подключите массажер к сети электропитания.
 3. Нажмите кнопку «ON/OFF» чтобы включить питание.
 4. Кнопка программы управляет выбором автопрограммы. Выберите один из трех автоматических режимов P1, P2, P3, либо настройте устройство вручную.
 5. Кнопка таймера поможет настроить время работы массажера от 5 до 30 минут. Если время массажа не установлено, автоотключение произойдет через 15 минут.
 6. Кнопка уровней скорости массажа позволяет настроить один из трех уровней: низкий, средний или высокий.
 7. Кнопка прогрева включит или выключит функцию прогрева.
 8. Кнопка реверса позволяет менять направление движения массажных роликов и валиков.
 9. Чтобы выключить массажер преждевременно, удерживайте кнопку питания «ON/OFF» в течение 2 секунд, массажер «выключится».
- Всегда выключайте массажер перед отключением от сети.**
В режиме «авто» массажер для ног выключится через 15 минут.
Рекомендуется не превышать продолжительность массажа более 30 минут за один раз.

СПОСОБЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА СТОПУ:



ВАРИАНТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ МАССАЖЕРА:

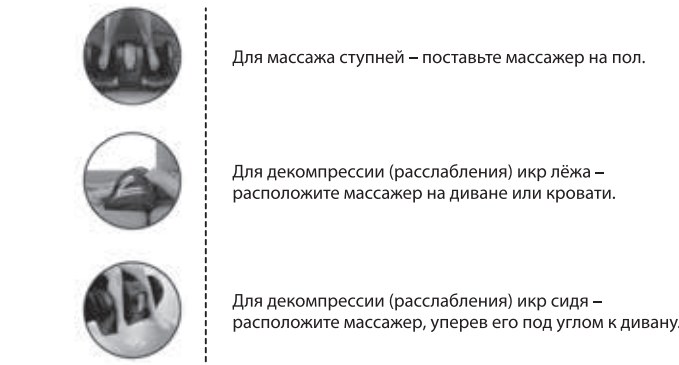

РУКОВОДСТВО ПО УСТРАНЕНИЮ НЕПОЛАДOK:

Проблема	Возможные причины	Способ устранения
Массажер не включается	- Массажер не подключен к сети электропитания. - Не выбрана ни одна из автопрограмм или не сделаны ручные настройки.	- Подключите массажер к сети электропитания. - Выберите автопрограмму или сделайте ручные настройки работы массажера.
Массажер внезапно прервал работу	- Пропало электропитание - Массаж длился более 15 минут. Произошло автовыключение. - Устройство работало длительное время без перерыва. Сработала защита от перегрева.	- Проверить наличие электропитания. Перезапустить заново. - Перезапустить устройство. - Дать устройству время остыть. После остывания оно продолжит работу.

Если предложенные решения не позволили решить проблему – не пытайтесь ремонтировать массажер самостоятельно. При обнаружении неисправностей обращайтесь к фирме-продавцу или в Службу заботы о клиентах, указанную на сайте производителя.

ГАРАНТИЯ:

Условия гарантии:

1. Гарантия распространяется только на обслуживание и ремонт тех частей изделия, в которых обнаружены производственные дефекты.
2. Если в течение гарантийного срока будет получена обоснованная претензия о выявленном производственном дефекте, мы либо устраним брак, либо заменим изделие на то, которое функционально эквивалентно оригинальному изделию.

Гарантия не распространяется:

1. При наличии механических или иных повреждений изделия, вызванных неправильной эксплуатацией прибора.
2. В случае ремонта или модификации массажера самостоятельно, не в специализированном сервисном центре.
3. В случае несоблюдения рекомендаций производителя по эксплуатации, уходу и хранению массажера, описанные в данной инструкции.
4. В случае проникновения жидкости, пыли, насекомых и других посторонних предметов внутрь изделия;
5. На неисправности изделия, вызванные следующими причинами:
 - естественным износом частей изделия, имеющих ограниченный срок службы;
 - действием непреодолимой силы (несчастный случай, пожар, наводнение, неисправность электрической сети и др.).

СПОСОБЫ ХРАНЕНИЯ И ОЧИСТКИ:

- После перемещения массажера в теплое помещение с холода его эксплуатация разрешается не ранее, чем через 1 час.
- Массажер лучше всего хранить в оригинальной упаковке, в сухом чистом, недоступном для детей месте.
- После использования, протрите массажер сухой салфеткой. Избегайте попадания влаги на рабочие элементы массажера. Перед чистой убедитесь, что он отключен от сети.
- Не используйте спирт, растворитель или другие агрессивные растворители для чистки массажера.
- При необходимости, тканевые чехлы можно снять и постирать.
- Не храните прибор в местах, откуда он может упасть в воду.
- Храните массажер вдали от огня, нагревательных приборов и прямых солнечных лучей.

ТРАНСПОРТИРОВКА:

Допускается в производственной упаковке.