

medical line



**ORLETT**

Зарегистрировано в Росздравнадзоре

Инструкция по применению  
ортопедических изделий

**ЭЛАСТИЧНЫЙ БАНДАЖ  
НА КОЛЕННЫЙ СУСТАВ**

**MKN-103**



[WWW.ORLETT.RU](http://WWW.ORLETT.RU)

## СВОЙСТВА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

---

Бандаж Orlett, арт. MKN-103, обеспечивает компрессионный эффект, легкую степень фиксации коленного сустава, способствует уменьшению отека и улучшению кровоснабжения мягких тканей, прилегающих к суставу.

Отпускается без рецепта.

## ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

---

- травмы, ушибы, растяжения связок суставов;
- профилактика развития и обострений воспалительных заболеваний суставов (артритов, тендинитов, тендовагинитов);
- болевой синдром при хронических дегенеративных заболеваниях суставов (артрозах и остеоартрозах);
- профилактика травм при занятиях спортом, производственных нагрузках на сустав.

## РЕЖИМ И СРОКИ НОШЕНИЯ

---

Для профилактики травм и обострений заболеваний сустава, а также в период реабилитации после травм. Рекомендованный режим: при нагрузках на сустав (производственных или спортивных).

Изделие предназначено для многократного личного использования. Возможные последствия при использовании товара не по назначению не выявлены.

## ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

---

- индивидуальная непереносимость материалов;
- гнойные заболевания и заболевания кожи в области применения бандажа.

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

---

Перед применением рекомендуется проконсультироваться со специалистом.


Людам, имеющим заболевания кожи, перед использованием бандажа необходимо проконсультироваться у врача.

При возникновении какого-либо физического дискомфорта или раздражения следует немедленно прекратить использование бандажа и проконсультироваться с врачом о возможности его дальнейшего применения.

## КОНСТРУКЦИЯ


Бандаж Orlett, арт. MKN-103, выполнен из современного материала, обладающего хорошими компрессионными свойствами.

## ПОРЯДОК НАДЕВАНИЯ

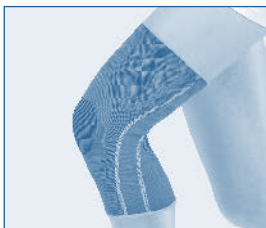

Бандаж натягивается на колено так, чтобы вставка специальной вязки располагалась в области коленного сустава, при этом название марки Orlett должно расположиться спереди, сверху.

## ПРАВИЛА ПОДБОРА

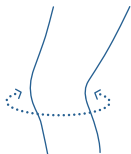

Сантиметровой лентой плотно, но не утягивая, измеряется окружность середины коленного сустава.

Согласно полученным результатам подобрать необходимую модель бандажа Orlett по таблице подбора размеров.

## ТАБЛИЦА ПОДБОРА РАЗМЕРОВ

| Размер                                    | S     | M     | L     | XL    |
|-------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Окружность середины коленного сустава, см | 32-35 | 36-39 | 40-46 | 47-52 |

Чтобы проверить правильность выбора размера, рекомендуется примерить бандаж. Важно, чтобы бандаж был удобен.

## ПРАВИЛА УХОДА

Для поддержания функциональных свойств полотна необходим регулярный уход за изделием. Рекомендуется стирать Ваше изделие после 3-5 применений. Только ручная стирка. Машинную стирку не применять. Максимальная температура 40°C. Обращаться с осторожностью. Не применять хлорсодержащие средства. Глажение запрещено. Пропаривание и обработку паром не применять. Сухая чистка/химчистка запрещена. Удаление пятен растворителями запрещено. Не применять сушку в барабане. Сушить не отжимая, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей. Для изделий со съёмными или отстёгивающимися каркасами, шинами, рёбрами жёсткости или шарнирами: отсоединять данные съёмные элементы перед стиркой! После полного высыхания изделия следует вернуть их обратно.



## СОСТАВ

67% полиамид, 27% эластан, 3% силикон, 3% латекс.

## УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Бандаж должен храниться при комнатной температуре, в сухом помещении, вдали от источников тепла, прямого солнечного света и пыли.

## УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

Бандаж утилизировать с бытовым мусором.

## СРОК ГОДНОСТИ

Срок годности не установлен.

Возможность использования бандажа дольше, чем предписано курсом лечения, должна быть согласована с врачом. Не допускается прекращение использования бандажа без согласования с лечащим врачом.

Не допускается самостоятельное изменение конструкции бандажа. Не допускается эксплуатация поврежденного бандажа. По окончании периода использования товар не представляет опасности для потребителя и подлежит утилизации.

## **КОМПЛЕКТНОСТЬ**

Ортопедическое изделие арт. МKN-103, инструкция по применению.

## **ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК**

6 месяцев с момента продажи при соблюдении инструкции.

## **ГАРАНТИЙНЫМИ СЛУЧАЯМИ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ**

- механические повреждения (включая случайные);
- повреждения, вызванные использованием товара не по назначению;
- дефекты, возникшие как следствие нарушения инструкции и правил ухода за изделием;
- несанкционированный ремонт или внесение изменений в конструкцию.



**К ВНЕШНЕМУ ВИДУ И ПОДБОРУ РАЗМЕРА  
ПРЕТЕНЗИЙ НЕ ИМЕЮ**

Дата покупки: \_\_\_\_\_

Подпись покупателя: \_\_\_\_\_

Изделия протезно-ортопедические: бандажи на нижние конечности: бандаж на коленный сустав: арт. MKN-103.

Товар является медицинским изделием.

Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/09550 от 17.12.2021 г. выдано Росздравнадзором, срок действия не ограничен.

**Производитель:** Рехард Технолджис ГмбХ, Германия, Rehard Technologies GmbH, 10785 Berlin, Potsdamer Str. 92, Germany.

**Импортёр:** ООО «Орто Медикл Групп», Россия, 143405, Московская обл., г. Красногорск, Ильинское шоссе, д. 16, корп. 1.

**Уполномоченный представитель в РФ:** ООО «НИКАМЕД», Россия, 127015, Москва, Бумажный проезд, д. 14, стр. 2.

**Претензии направлять:** Россия, 127220, Москва, а/я № 58, ООО «НИКАМЕД», тел.: 8-800-33-33-112, e-mail: skk@nikamed.ru.

