

VENOTEKS

ВАША ПОБЕДА НАД ВАРИКОЗОМ

гольфы для мужчин
и женщин

ИНСТРУКЦИЯ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ
И УХОДУ
ЗА ИЗДЕЛИЯМИ

venoteks.ru

DAILY

VENOTEKS

Изделия торговой марки VENOTEKS, производителем которых является немецкая компания Rehard Technologies GmbH, за долгое время своего присутствия на российском рынке приобрели широкую популярность среди специалистов и покупателей.

Каждое из предлагаемых на российском рынке изделий марки VENOTEKS разрабатывается в соответствии с антропометрическими параметрами российских потребителей, с учетом требований сертифицирующих органов и стандартов лечения, принятых в Российской Федерации.

При производстве используются только самые современные материалы от европейских производителей, такие как хлопок, микрофибра, полипропиленовое микроволокно (Dryarn), шёлк, шерсть, нейлон и эластан. На все материалы имеются сертификаты качества и экологического соответствия. Трикотаж VENOTEKS сертифицирован по системе OEKO-Tex 100, гарантирующей соответствие европейским нормам безопасности текстильных изделий. Перед отгрузкой потребителям все изделия проходят строгий контроль качества и компрессионных параметров.

Качество компрессионного трикотажа VENOTEKS подтверждено Регистрационным удостоверением, выданным Росздравнадзором. Мы уверены в надёжности нашей продукции и гарантируем сохранение компрессионных свойств трикотажа VENOTEKS в течение 6 месяцев при ежедневном применении и соответствующем уходе.

Компания-производитель Rehard Technologies GmbH заботится о своих клиентах и постоянно совершенствует ассортимент с тем, чтобы изделия не только гарантированно сохраняли здоровье, но и отвечали современным тенденциям моды и высоким требованиям к комфорту, предъявляемым современным пользователем.

ЛИНИЯ VENOTEKS DAILY

Медицинские компрессионные гольфы Venoteks Daily подходят для повседневного использования как женщинам, так и мужчинам. Изготовлены по европейским стандартам качества с учетом анатомического строения стопы.

В ассортименте представлены следующие виды изделий:

- гольфы VENOTEKS DAILY с хлопком;
- гольфы VENOTEKS DAILY для занятий спортом.

Все изделия представлены в I классе компрессии (15-21 мм рт.ст.) с целью профилактики и лечения начальных проявлений заболеваний вен. Гольфы улучшают кровообращение ног, предупреждая образование отеков и тяжести во время статических и динамических нагрузок. Обеспечивают профилактику тромбоза вен и тромбоземболии во время авиаперелетов. Способствуют улучшению общего самочувствия и снижают утомляемость в течение дня.

Гольфы VENOTEKS DAILY с хлопком (Cotton)

Медицинские компрессионные гольфы VENOTEKS DAILY с хлопком подходят для людей с чувствительной кожей, склонной к аллергическим реакциям. Хлопчатобумажные волокна впитывают излишки влаги и пота на коже и сохраняют их внутри волокна, тем самым снижая риск роста бактерий на коже. Обеспечивают элегантный внешний вид и комфорт в течение всего дня.

ОСОБЕННОСТИ ГОЛЬФОВ VENOTEKS DAILY С ХЛОПКОМ



Гольфы VENOTEKS DAILY для занятий спортом (Active)

Медицинские компрессионные гольфы VENOTEKS DAILY для занятий спортом подходят при всех видах физической активности. Высокотехнологичное микроволокно Dryarn с функцией терморегуляции обеспечивает отведение влаги с поверхности кожи при физических нагрузках. Изделия могут быть использованы в повседневной жизни.

ОСОБЕННОСТИ ГОЛЬФОВ VENOTEKS DAILY ДЛЯ ЗАНЯТИЙ СПОРТОМ




ЛЕЧЕБНЫЕ СВОЙСТВА

Лечебные свойства VENOTEKS основаны на том, что каждое изделие равномерно по всей окружности ноги оказывает давление (компрессию) на мягкие ткани и далее на стенки вен. Постоянная физиологически распределённая компрессия точно рассчитана, дозирована и измерена в миллиметрах ртутного столба (мм рт.ст.). Параметры компрессии медицинских трикотажных изделий заложены в сложной современной технологии их изготовления. Компрессия максимальна в области лодыжки и постепенно уменьшается к колену в следующем процентном соотношении: лодыжка 100%, верхняя часть голени 70%.


Как работает компрессионный трикотаж:

- ✓ сужает просвет вен и улучшает работу венозных клапанов;
- ✓ ускоряет кровоток и приток кислорода к мышцам;
- ✓ уменьшает отёки, усталость и боли в ногах;
- ✓ предотвращает прогрессирование варикозной болезни и развитие её осложнений;
- ✓ препятствует образованию тромбов.

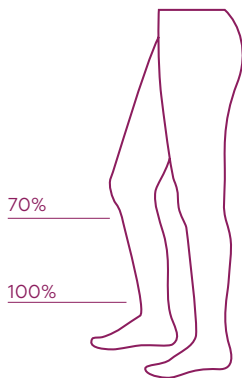

Гольфы создают дополнительный каркас, поддерживающий вены, и защищают их от чрезмерного растяжения постоянным давлением крови. Компрессионные свойства трикотажа VENOTEKS гарантированно сохраняются в течение шести месяцев при соблюдении инструкции по применению и уходу.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

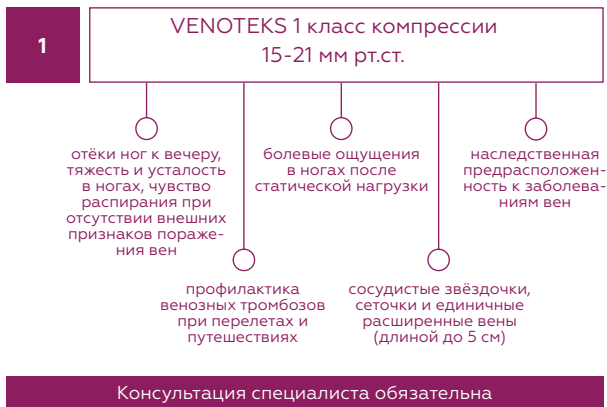

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Обязательно поставьте в известность специалиста при наличии у Вас следующих заболеваний:

- Декомпенсированная сердечно-лёгочная недостаточность.
- Диабетическая полинейропатия и ангиопатия.
- Хронические облитерирующие заболевания артерий нижних конечностей (атеросклероз, воспалительные заболевания артерий, осложнённые стенозом, тромбозом или тромбоземболией) лодыжечно-плечевой индекс $<0,7$. При снижении давления на уровне лодыжки ниже 100 мм рт.ст. (но выше 60 мм рт.ст.) могут быть использованы изделия I класса компрессии.
- Трофические язвы не венозной этиологии.
- Острая инфекция мягких тканей ног. Септический флебит.
- Местные кожные заболевания ног.
- Индивидуальная непереносимость материалов, входящих в состав трикотажа.

Первые признаки заболеваний вен (уменьшаются после ночного отдыха):

- Отеки голени и стопы к концу дня, глубокие следы от носков на коже.
- Чувство тяжести и распирания в икрах, появляющееся при длительном пребывании в положении сидя или стоя.
- Чувство дискомфорта в ногах к вечеру.

При более тяжелой стадии появляются:

- Боль и распирание в икрах ног.
- Чувство жара в ногах и ночные судороги.
- Внешние изменения – на бёдрах и голени образуются мелкие сине-красные сосудистые «звёздочки», темно-синие внутрикожные вены и извитые варикозные вены.

Группы риска:

- Варикозная болезнь у родственников.
- Работа «на ногах».
- Регулярная «сидячая» работа.
- Беременность и послеродовой период.
- Регулярное ношение обуви на каблуках выше 4 см.
- Избыточная масса тела.
- Прием гормональных противозачаточных препаратов после 30 лет.
- Длительные интенсивные спортивные нагрузки.
- Регулярное поднятие тяжестей.

ТАБЛИЦА ПОДБОРА РАЗМЕРА И СОСТАВ ИЗДЕЛИЙ

Размер	S	M	L	XL	XXL
--------	---	---	---	----	-----

Измерение окружности (см)


b	18-21	20-23	22-25	24-27	26-29
d	28-34	31-37	34-40	37-43	40-46

Измерение длины (см)

A-D	37-45	37-45	37-45	37-45	37-45
-----	-------	-------	-------	-------	-------

Размер обуви

A	36-38	38-40	40-42	42-44	44-47
---	-------	-------	-------	-------	-------

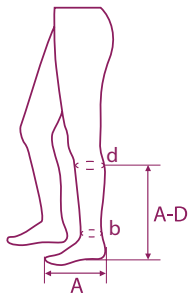

b – окружность надлодыжечной области (самая тонкая часть ноги)

d – окружность под коленной чашечкой (на два пальца ниже коленного сустава)

A-D – длина от уровня D до низа пятки

A – размер обуви

Обратите внимание!

При подборе размера гольфов руководствуйтесь приведенными здесь таблицами. Измерения нужно проводить утром, до появления отеков на ногах.

Артикул	Вид изделия	Вид мыса	Класс	Состав
с хлопком (Cotton)				
1C108	 гольфы для мужчин и женщин	закрытый	1	63% хлопок, 27% полиамид, 10% эластан
для занятий спортом (Active):				
1C128	 гольфы для мужчин и женщин	закрытый	1	57% полипропилен, 31% полиамид, 12% эластан

КАК ПРАВИЛЬНО НАДЕВАТЬ ТРИКОТАЖ VENOTEKS

Рекомендуется постирать изделие перед первым применением.

Надевайте изделия VENOTEKS утром до появления отёков на ногах. Если Вы снимаете компрессионный трикотаж в течение дня, то надевать его нужно после отдыха ног. Помните, что острые ногти, мозоли, заусенцы на руках и ногах могут повредить изделие. Поэтому при использовании компрессионного трикотажа нужно постоянно ухаживать за ногтями и кожей рук и ног.

- **Кольца, браслеты и другие украшения на руках могут повредить изделие. Их нужно снимать перед надеванием и стиркой компрессионных изделий.**
- **Рекомендуется надевать изделие в резиновых перчатках. Они уменьшают скольжение кожи рук, позволяя прилагать меньше усилий, быстрее надевать изделие и лучше разглаживать складки.**

Схема надевания



- Внимательно прочитайте раздел о подготовке рук и ног к надеванию изделия.
- Выверните изделие наизнанку до пятки.



- Осторожно натяните изделие на ступню и убедитесь, что пятка изделия правильно расположена на ноге.



- Натягивайте изделие разглаживающими движениями через лодыжку к колену, растягивая каждый участок. Не следует тянуть изделие с усилием за верхний край.



- Окончательно разгладьте мелкие морщинки по всей длине изделия.

Прежде чем снимать изделие, удалите с рук все украшения. Рекомендуется снимать изделие в резиновых перчатках. Возьмите изделие за верхний край и стягивайте его вниз по направлению к стопе. Аккуратно снимите пятку и далее всё изделие.

КАК УХАЖИВАТЬ ЗА ТРИКОТАЖЕМ VENOTEKS

- Изделия VENOTEKS нужно ежедневно стирать вручную или в стиральной машине (деликатный режим).
- Температура воды при ручной и машинной стирке не должна превышать 30°C.
- В качестве моющих средств нужно выбирать жидкие слабощелочные шампуни или средства для стирки деликатных тканей.
- Не используйте стиральные порошки и кондиционеры.
- При машинной стирке используйте защитный мешочек для белья или положите изделие в наволочку. Не используйте режим машинной сушки.
- После ручной стирки изделие нужно тщательно прополоскать в тёплой воде.
- Не выкручивайте изделие, заверните в полотенце и слегка отожмите его.
- Сушите изделие при комнатной температуре или в прохладном месте на сухом полотенце.

Обратите внимание!

Изделия VENOTEKS нельзя кипятить, отбеливать, выжимать, прилагая особую силу, гладить и сушить на батареях, нагревательных приборах, сушилках и под прямыми лучами солнца.

Недопустимо использование химических растворителей и пятновыводителей во избежание повреждения изделия.

Не следует тянуть и обрезать технологические концы нитей внутри изделия.

Для предотвращения образования складок полностью просушите изделие и аккуратно сложите его в оригинальную упаковку или храните в подходящем защитном мешочке.



ИНФОРМАЦИЯ

Комплектность

Компрессионное изделие, инструкция.

Условия утилизации

Утилизация с бытовым мусором.

Гарантийный срок

6 месяцев со дня продажи на сохранение компрессионных свойств при соблюдении инструкции.

Гарантийными случаями не являются

- Механические повреждения (включая случайные).
- Повреждения, вызванные использованием товара не по назначению.
- Дефекты, возникшие вследствие нарушения инструкции по применению, правил хранения и ухода за изделием.
- Несанкционированный ремонт или внесение изменений в конструкцию.

Условия хранения

Изделие должно храниться при комнатной температуре, в сухом помещении, вдали от источников тепла, прямого солнечного света и пыли.

Срок годности

Не установлен.

Возможные последствия при использовании товара не по назначению не выявлены.

Соблюдение мер безопасности не требуется.

Изделие предназначено для многократного личного использования.

По окончании периода использования товар не представляет опасности для потребителя и подлежит утилизации с бытовыми отходами. Не подлежит вторичной переработке.

Внешний вид изделия может отличаться от изображений в различных источниках информации, что не влияет на потребительские свойства.

К ВНЕШНЕМУ ВИДУ И ПОДБОРУ РАЗМЕРА ИЗДЕЛИЯ ПРЕТЕНЗИЙ НЕ ИМЕЮ

Дата покупки _____ Подпись покупателя _____

Обязательно укажите размеры потребителя.

1. Окружность надлодыжечной области (см) _____
2. Окружность под коленной чашечкой (см) _____
3. Окружность бедра на 5 см ниже ягодичной складки _____
4. Длина: А-D (гольфы) (см) _____
А-G (чулки, колготки) (см) _____

Информация для покупателей:

Изделия чулочно-носочные надлежащего качества не подлежат возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации в соответствии с постановлением Правительства РФ № 55 от 19.01.1998 г. Претензии по качеству в течение гарантийного срока принимаются при возврате изделия в упаковке производителя.

Изделия компрессионные для нижних и верхних конечностей в наборах и отдельных упаковках: чулки.

Товар является медицинским изделием. Отпускается без рецепта.
Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2012/13480 от 12.04.2022 г.
выдано Росздравнадзором, срок действия не ограничен.

Изготовитель: Рехард Технолоджис ГмбХ,
Потсдамер штрассе, 92, 10785, Берлин, Германия.

Место производства: Sanyleg SRL, IT-46042 Castel Goffredo
(MN)-Via Albania 1/3, Italy.

Импортер/уполномоченный представитель в РФ: ООО «НИКАМЕД»,
Россия, 127015, Москва, Бумажный проезд, д. 14, стр. 2.

Претензии направлять:

Россия, 127220, Москва, а/я № 58, ООО «НИКАМЕД»,
тел.: 8-800-33-33-112, e-mail: skk@nikamed.ru.

