

medical line



ORLETT

Зарегистрировано в Росздравнадзоре



Инструкция по применению
ортопедических изделий

БАНДАЖ НА КОЛЕННЫЙ СУСТАВ

RKN-103(M)

WWW.ORLETT.RU

СВОЙСТВА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Бандаж ORLETT на коленный сустав эластичный с металлическими спиральными ребрами жесткости, арт. RKN-103(M), стабилизирует коленный сустав в период воспалительного заболевания, при травме, после оперативного лечения, ограничивает патологические движения и разгружает коленный сустав.

Бандаж выполнен из пористого упругого материала – неопрена – не препятствующего динамичному воздухообмену. Теплосберегающий эффект неопрена способствует усилению кровообращения мышц и улучшению впитывания лекарственных средств.

Ношение бандажа способствует уменьшению отека. Валик-кольцо в области коленной чашечки ограничивает подвижность коленной чашечки, а дополнительные спиральные ребра жесткости снижает ударные нагрузки на сустав.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- воспалительные и дегенеративные заболевания (артриты, синовиты, периартикулярные отеки, бурситы и артрозы в начальной стадии), если не противопоказан тепловой эффект;
- профилактика травм коленного сустава и коленной чашечки (надколенника) при занятиях спортом и физическим трудом;
- ушибы, растяжения связок коленного сустава в подостром периоде;
- боли в коленном суставе;
- заболевания коленной чашечки;
- реабилитация после травм и операций на коленном суставе.

РЕЖИМ И СРОКИ НОШЕНИЯ

Режим и сроки ношения назначает лечащий врач. Для профилактики травм и обострения заболеваний коленного сустава рекомендованный режим: при нагрузках на коленный сустав (спортивных, производственных).

Изделие предназначено для многократного личного использования.

Возможные последствия при использовании товара не по назначению не выявлены.

ПРОТИВПОКАЗАНИЯ

- первые трое суток острой травмы;
- острые гнойные воспалительные заболевания;
- опухолевые заболевания в области применения бандажа;
- индивидуальная непереносимость материалов;
- гнойные заболевания и заболевания кожи в области применения изделия.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- заболевания, при которых противопоказана гипертермия;
- при возникновении физического дискомфорта, раздражения следует немедленно прекратить использование бандажа и проконсультироваться с лечащим врачом о возможности его дальнейшего применения.

Перед применением рекомендуется проконсультироваться со специалистом.

КОНСТРУКЦИЯ

Эластичный бандаж ORLETT на коленный сустав с металлическими спиральными ребрами жесткости, арт. RKN-103(M) (рис. 1), выполнен из пористого материала (неопрена), обладающего свойством сберегать тепло тела, не препятствуя воздухообмену.

На рисунке отмечены следующие элементы конструкции:




рис. 1

1. Манжета.
2. Упругий валик-кольцо.
3. 4 спиральных ребра жесткости — по два с каждой стороны.

ПОРЯДОК НАДЕВАНИЯ

Бандаж надевается непосредственно на коленный сустав. При надевании необходимо совместить отверстие на передней поверхности бандажа с коленной чашечкой. При этом валик-кольцо будет плотно прилегать к области коленной чашечки.

ПРАВИЛА ПОДБОРА

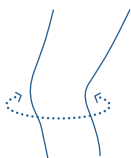

Сантиметровой лентой плотно, но не утягивая, измеряется окружность середины коленного сустава.

Согласно полученным результатам подобрать необходимую модель бандажа ORLETT по таблице подбора размеров.

ТАБЛИЦА ПОДБОРА РАЗМЕРОВ

Размер	Окружность середины коленного сустава, см	Окружность бедра на 10 см выше середины коленного сустава
S	30-35	
M	35-40	
L	40-45	
XL	45-50	
XXL	более 50	
FL	40-45	55-60
FXL	45-50	60-65

Чтобы проверить правильность выбора размера, рекомендуется примерить бандаж. Важно, чтобы бандаж был удобен.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Ортопедическое изделие арт. RKN-103(М), инструкция по применению.

СОСТАВ

35% спонжпрен, 25% полиэстер, 32% полиамид, 8% сталь.

ПРАВИЛА УХОДА

Для поддержания функциональных свойств полотна необходим регулярный уход за изделием. Рекомендуется стирать Ваше изделие после 3-5 применений. Только ручная стирка. Машинную стирку не применять. Максимальная температура 40°C. Обращаться с осторожностью.

Не применять хлорсодержащие средства. Глажение запрещено. Пропаривание и обработку паром не применять. Сухая чистка/химчистка запрещена. Удаление пятен растворителями запрещено. Не применять сушку в барабане. Сушить не отжимая, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей.

Для изделий со съёмными или отстёгивающимися каркасами, шинами, рёбрами жёсткости или шарнирами: отсоединять данные съёмные элементы перед стиркой! После полного высыхания изделия следует вернуть их обратно.



УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Бандаж должен храниться при комнатной температуре, в сухом помещении, вдали от источников тепла, прямого солнечного света и пыли.

УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

Бандаж утилизировать с бытовым мусором.

СРОК ГОДНОСТИ

Срок годности не установлен.

Возможность использования бандажа дольше, чем предписано курсом лечения, должна быть согласована с врачом. Не допускается прекращение использования бандажа без согласования с лечащим врачом. Не допускается самостоятельное изменение конструкции бандажа. Не допускается эксплуатация поврежденного бандажа.

По окончании периода использования товар не представляет опасности для потребителя и подлежит утилизации.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

6 месяцев с момента продажи при соблюдении инструкции.

ГАРАНТИЙНЫМИ СЛУЧАЯМИ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ

- механические повреждения (включая случайные);
- повреждения, вызванные использованием товара не по назначению;
- дефекты, возникшие как следствие нарушения инструкции по применению и правил ухода за изделием;
- несанкционированный ремонт или внесение изменений в конструкцию.

**К ВНЕШНЕМУ ВИДУ И ПОДБОРУ РАЗМЕРА
ПРЕТЕНЗИЙ НЕ ИМЕЮ**

Дата покупки: _____

Подпись покупателя: _____

Изделия протезно-ортопедические: бандажи на нижние конечности: бандажи на коленный сустав: арт. RKN-103(M).
Товар является медицинским изделием.
Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/09550 от 17.12.2021 г. выдано Росздравнадзором, срок действия не ограничен.

Производитель: Рехард Технолджис ГмбХ, Германия, Rehard Technologies GmbH, 10785 Berlin, Potsdamer Str. 92, Germany.

Импортер: ООО «Орто Медикл Групп», Россия, 143405, Московская обл., г. Красногорск, Ильинское шоссе, д. 16, корп. 1.

Уполномоченный представитель в РФ: ООО «НИКАМЕД», Россия, 127015, Москва, Бумажный проезд, д. 14, стр. 2.

Претензии направлять: Россия, 127220, Москва, а/я № 58, ООО «НИКАМЕД», тел.: 8-800-33-33-112, e-mail: skk@nikamed.ru.

