



Товар является медицинским изделием. Отпускается без рецепта.
Регистрационное удостоверение № РЗН 2016/4928 от 23.09.2020 г.
выдано Росздравнадзором, срок действия не ограничен.
Декларация о соответствии № РОСС RU Д-ДЕ.НА38.В.00258/20
(с 01.10.2020 г. по 30.09.2023 г.) выдана ООО «Сервис Плюс».

Производитель: Рехард Технолоджис ГмбХ, Германия,
Rehard Technologies GmbH, 10785 Berlin, Potsdamer Str. 92, Germany.
Импортер: ООО «Орто Медикл Групп», Россия, 143405, Московская
область, г. Красногорск, Ильинское шоссе, д. 16, корп. 1.
Претензии направлять: Россия, 127220, Москва, а/я № 58,
ООО «НИКАМЕД» представитель в России и СНГ,
тел.: 8-800-33-33-112, e-mail: skk@nikamed.ru.

Арт.: INTORLC-DANS-N3_09/23

УХОД:

бандаж периодически моют теплой водой с детским мылом, после чего сушат вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей.



СОСТАВ:

Пластиковая рама с пенополиуретановыми накладками и застежками «Велкро».

УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ:

Изделие может быть утилизировано с бытовым мусором, картонная коробка и бумажный вкладыш могут быть подвергнуты повторной переработке. Изделия не представляют угрозу после окончания срока годности.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК:

60 дней со дня продажи (на сохранение механических свойств).

Гарантийными случаями не являются:

- механические повреждения (включая случайные);
- повреждения, вызванные использованием товара не по назначению;
- дефекты, возникшие как следствие нарушения инструкции по применению и правил хранения и ухода за изделием;
- несанкционированный ремонт или внесение изменений в конструкцию.

СРОК ГОДНОСТИ:

Срок годности не установлен. По окончании периода использования товар не представляет опасности для потребителя и подлежит утилизации.

medical line



ORLETT

Зарегистрировано в Росздравнадзоре



Инструкция по применению
ортопедических изделий

**КОРРЕГИРУЮЩИЕ БАНДАЖИ
НА БОЛЬШОЙ ПАЛЕЦ СТОПЫ**

DANS

WWW.ORLETT.RU

НАЗНАЧЕНИЕ:

Консервативное лечение Hallux valgus (вальгусная деформация большого (первого) пальца стопы), фиксация в правильном положении после оперативного лечения. Возможные последствия при использовании товара не по назначению не выявлены. Изделие предназначено для многократного личного использования.

Перед применением рекомендуется проконсультироваться со специалистом.

ОГРАНИЧЕНИЯ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

не использовать при открытых и мокнущих ранах.

ОКАЗЫВАЕМЫЕ ЭФФЕКТЫ:

- применяется при начальной и средней степени нефиксированного Hallux valgus (отклонение первых пальцев наружу) для того, чтобы вернуть большой палец стопы в нормальное положение;
- применение бандажа Dans после операции по поводу Hallux valgus повышает эффективность реабилитации;
- приостанавливает развитие деформации суставов большого пальца;
- нормализует тонус связок и мышц стопы.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Бандажи Dans следует надевать только на время сна и снимать перед подъемом с постели. После операции следует применять бандажи Dans после заживления кожи. При наличии диабета перед применением проконсультируйтесь у врача. Натяжение бандажа постепенно усиливают до полного излечения (исправления деформации пальца). Соблюдения мер безопасности не требуется.

КОНСТРУКЦИЯ НОЧНОГО БАНДАЖА DANS:

1. Упор для большого пальца
2. Накладка на сустав большого пальца
3. «Рожки» бандажа
4. Лента застежки-липучки

ВНИМАНИЕ!

Перед использованием определите правое и левое изделие (см. рис. 2)

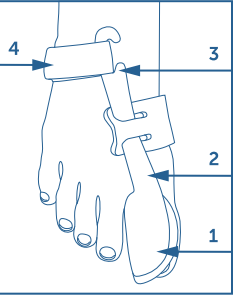


Рис. 1

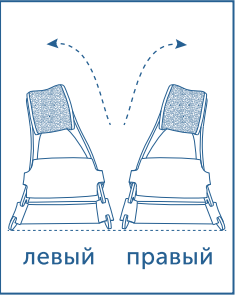


Рис. 2

СПОСОБ НАДЕВАНИЯ:

Расстегните ленту застежки-липучки (4). Возьмите бандаж в руку, так чтобы «рожки» бандажа (3) были направлены в сторону пятки. Аккуратно наденьте бандаж на большой палец так, чтобы упор для большого пальца (1) находился между первым и вторым пальцами ноги. Плотно прижмите «рожки» бандажа (3) к подошвенной и тыльной поверхности стопы. Упор (1) должен плотно прилегать к наружной поверхности большого пальца (рис. 3).

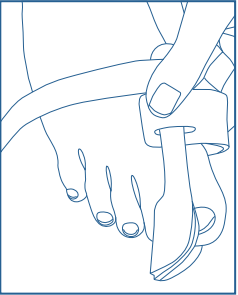


Рис. 3

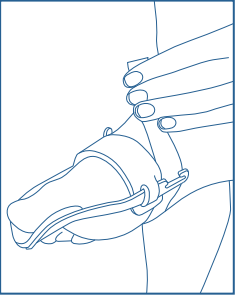


Рис. 4

Оберните ленту застежки-липучки (4) вокруг наружного края стопы и зацепите ее за прорезь «рожка» на подошвенной поверхности стопы (рис. 4). Обратите внимание, чтобы при этом сам бандаж не смещался. Протяните ленту застежки-липучки (4) к наружному краю стопы и застегните бандаж (рис. 5). Натяжение ленты застежки-липучки регулирует степень отведения большого пальца. После застегивания липучки проверьте правильность положения бандажа (рис. 6).

ТАБЛИЦА ПОДБОРА РАЗМЕРОВ

Размерный ряд	S	M	L
Размер обуви	34-36	37-40	41-44

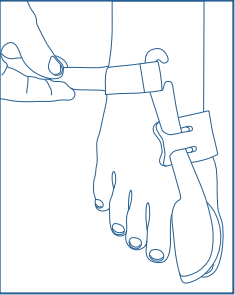


Рис. 5

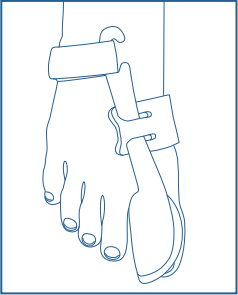


Рис. 6